



Fisher
Bioblock Scientific

Parc d'innovation - BP 50111 - F67403 illkirch cedex

France

tél 03 88 67 14 14

fax 03 88 67 11 68

email infos@bioblock.fr

www.bioblock.com

Belgique / België

tél 056 260 260

fax 056 260 270

email belgium@bioblock.com

www.be.fishersci.com

Mode d'emploi

Pompe Reglo Analog CPF



Betriebsanleitung



15.07.02 CB/GP

Operating Manual Mode d'emploi



Ventillose Taumelkolbenpumpe

REGLO-CPF Analog
Antrieb ISM 1014

Kopf 2-25 µl/Hub
FMI 009 Keramikkolben
FMI 010 Stahlkolben

Kopf 5-50 µl/Hub
FMI 005 Keramikkolben
FMI 013 LF = Low Flow

Kopf 10-100 µl/Hub
FMI 007 Keramikkolben

Deutsch

Valveless Rotary Piston Pump

REGLO-CPF Analog
Drive ISM 1014

Head 2-25 µl/stroke
FMI 009 ceramic piston
FMI 010 steel piston

Head 5-50 µl/stroke
FMI 005 ceramic piston
FMI 013 LF = Low Flow

Head 10-100 µl/stroke
FMI 007 ceramic piston

English

Pompe à piston rotatif sans soupape

REGLO-CPF Analog
Moteur ISM 1014

Tête 2-25 µl/course
FMI 009 piston céramique
FMI 010 piston en acier

Tête 5-50 µl/course
FMI 005 piston céramique
FMI 013 LF = Low Flow

Tête 10-100 µl/course
FMI 007 piston céramique

Français



ISMATEC®
A Unit of IDEX Corporation





■ 2

ISMATEC SA/REGLO CPF Anaog/15.07.02/CB/GP



**Kolben-
Pumpenköpfe
nach Gebrauch spülen**

Wir empfehlen, den Pumpenkopf **nach jedem Pumpvorgang** zu spülen, damit sich keine Reste zwischen Kolben und Zylinderwand festsetzen können (besonders beim Pumpen von salz-, eiweiß- oder partikelhaltigen Medien).

Es dürfen keine Medien gepumpt werden, welche abrasive Partikel enthalten. Beachten Sie bitte unseren Hinweis betreffend Filtration in den Kapiteln Sicherheitsvorkehrungen und Unterhalt.

Auf Kolbenbrüche gewähren wir keine Garantie.

**Piston
pump-heads
require thorough
flushing after use**

We recommend you to flush the pump-head **after every pumping process** to prevent the piston from seizing by remaining particles (especially after pumping media containing salt, protein or particles).

Do not pump fluids containing suspended solids that are abrasive. Please observe our note regarding filtration in the chapters Safety Precautions and Maintenance.

Piston fractures are not covered by our warranty.

**Têtes à pistons
Rincer
soigneusement après
usage**

Nous vous recommandons de rincer la tête de pompe **après chaque processus de pompage** afin d'éviter que des restes ne se fixent entre le piston et la paroi du cylindre (particulièrement après le pompage de liquides contenant des sels, des protéines ou des particules).

Ne pas pomper de liquides contenant des particules abrasives. Veuillez tenir compte de notre notice relative à la filtration dans les chapitres Mesures de sécurité et Entretien.

Les bris de pistons sont exclus de la garantie fournie par ISMATEC



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsvorkehrungen	6
Garantiebestimmungen	11
Produkt	12
Geräterückwand	14
Netzspannung	14
Spannungswechsel	15
Sicherungswechsel	15
Inbetriebnahme	16
Nullpunkt-Kalibrierung	17
Hubvolumen einstellen	18
Überlastschutz	19
Pumpen gegen Druck	20
Wenn die Pumpe ruht	20

Contents

Safety precautions	6
Warranty terms	11
Product	12
Rear panel	14
Mains voltage	14
Voltage setting	15
Changing the fuses	15
Starting the pump	16
Zero point calibration	17
Setting the stroke volume	18
Overload protector	19
Pumping against pressure	20
When the pump is not in use	20

Sommaire

Mesures de précaution	6
Conditions de garantie	11
Produit	12
Tableau arrière	14
Tension d'alimentation	14
Commutation de la tension	15
Remplacement des fusibles	15
Mise en marche de la pompe	16
Calibration du point zéro	17
Réglage du vol. de course	18
Protection de surcharge	19
Pompage contre pression	20
Quand la pompe est hors-service	20



Inhaltsverzeichnis

Analogschnittstelle	21
Einstellungen Schalter S1	24
Zubehör	25
Fließraten	26
Unterhalt	27
Service und Reparaturen	28
Ersatzteile	29
Technische Daten	30

Contents

Analog interface	21
Settings switch S1	24
Accessories	25
Flow-rates	26
Maintenance	27
Service and repairs	28
Spare-parts	29
Technical specifications	30

Sommaire

Interface analogique	21
Réglages du switch S1	24
Accessoires	25
Débîts	26
Entretien	27
Service technique et réparation	28
Pièces détachées	29
Spécifications techniques	30

ISMATEC SA/REGLO OPF Analog/15.07.02//CB/GP



Hinweis

Wir empfehlen, diese Betriebsanleitung genau durchzulesen.
Beim Betrieb einer Pumpe sind gewisse Gefahren nicht auszuschliessen.
ISMATEC SA haftet nicht für Schäden, die durch den Einsatz einer ISMATEC®-Pumpe entstehen.
Der Umgang mit Chemikalien liegt nicht im Verantwortungsbereich der ISMATEC SA.

Please note

We recommend you to read this operating manual carefully.
When operating a pump, certain hazards cannot be excluded.
ISMATEC SA does not take liability for any damage resulting from the use of an ISMATEC® pump.
ISMATEC SA does not admit responsibility for the handling of chemicals.

Sicherheitsvorkehrungen

Die ISMATEC® Pumpen sind für Förderzwecke in Labors und der Industrie vorgesehen. Wir setzen voraus, dass die GLP-Richtlinien »Gute Laborpraxis« sowie die nachstehenden Empfehlungen befolgt werden.

■ Die Pumpe darf nur innerhalb der vorgegebenen Betriebs- und Umgebungsbedingungen betrieben werden.

■ Die Pumpe darf nicht eingesetzt werden:
– für medizinische Anwendungen am Menschen
– in ex-geschützten Räumen oder in Gegenwart von entflamm- baren Gasen und Dämpfen.

■ Der Stromkreis zwischen Netz und Pumpe muss geerdet sein.

Safety precautions

ISMATEC® Pumps are designed for pumping applications in laboratories and industry. As such it is assumed that Good Laboratory Practice (GLP) and our following recommendations will be observed.

■ The pump must not be operated outside the destined operating and environmental conditions.

■ The pump must not be used:
– for medical applications on human beings
– in explosion proof chambers or in the presence of flammable gases or fumes

■ The circuit between mains supply and pump has to be earthed.

Mesures de précaution

Les pompes ISMATEC® sont prévues pour l'usage en laboratoire et dans l'industrie. Dès lors, nous présumons que les utilisateurs emploient nos appareils selon les règles de l'art (normes GLP) et conformément à nos recommandations:

■ La pompe ne doit être mise en opération que dans le cadre des conditions de fonctionnement et d'environnement prescrites.

■ La pompe ne doit pas être utilisée:
– pour des applications médicales sur des êtres humains,
– dans des locaux protégés contre les explosions ou en présence de gaz et vapeurs inflammables.

■ Le circuit électrique entre le réseau et la pompe doit être mis à la terre.





Remarque

Nous recommandons de lire attentivement le présent mode d'emploi. Il n'est pas possible d'exclure certains risques en cas d'utilisation d'une pompe.

ISMATEC SA décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'utilisation d'une pompe ISMATEC®.

ISMATEC SA décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'emploi de produits chimiques.

Sicherheitsvorkehrungen

- Manipuleren Sie nicht am Pumpenkopf, bevor die Pumpe ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
- Der Pumpenkopf darf nur bei ausgeschalteter Pumpe abgenommen werden.
- Das Gehäuse darf während des Betriebes nicht geöffnet bzw. abgenommen werden.

Safety precautions

- Do not manipulate the pump-head before the pump is switched off and disconnected from the mains supply.
- The pump must be switched off before taking off the pump-head.
- Do not open or remove the housing while the pump is operating.

Mesures de précaution

- Ne manipulez jamais la tête de pompe avant que la pompe n'ait été mise hors service et déconnectée du réseau électrique.
- Ne procéder au montage ou à l'échange de têtes de pompes que lorsque la pompe est éteinte.
- N'ouvrez pas et n'enlevez pas le boîtier pendant que la pompe fonctionne.



Sicherheitsvorkehrungen

Partikelhaltige Medien:
Wir empfehlen, den Pumpenkopf **nach jedem Pumpvorgang** zu spülen, damit sich keine Reste zwischen Kolben und Zylinderwand festsetzen können (besonders beim Pumpen von salz-, eiweiß- oder partikelhaltigen Medien).

Es dürfen keine Medien mit Partikeln größer als 0,8 mm gepumpt werden.

Der Kolbenhub bzw. das Hubvolumen ist der Partikelgröße entsprechend genügend groß zu wählen!

Auf Kolbenbrüche gewähren wir keine Garantie.

Safety precautions

Media containing particles:
We recommend you to rinse the pump-head **after every pumping process** to prevent the piston from seizing by remaining particles (especially after pumping media containing salt, protein or particles).

Do not pump media containing particles that exceed a diameter of 0,8 mm.

Piston stroke or stroke volume must be set large enough with respect to the particle size!

Piston fractures are not covered by our warranty.

Mesures de sécurité

Milieux contenant des particules:
Nous vous recommandons de rincer la tête de pompe **après chaque processus de pompage** afin d'éviter que des restes ne se fixent entre le piston et la paroi du cylindre (particulièrement après le pompage de liquides contenant des sels, des protéines ou des particules).
Ne pas pomper de liquides contenant des particules plus grandes que 0,8 mm.

La course de piston ou le volume de course de piston doivent être définis assez grands par rapport à la taille des particules.

Les bris de pistons sont exclus de la garantie fournie par ISMATEC SA.



Sicherheitsvorkehrungen

Aggressive Medien:

Das Pumpen aggressiver Medien kann bei den Dichtungen im Pumpenkopf zu Lecks führen.

Überprüfen Sie deshalb Ihre Pumpe regelmäßig auf Dichtheit.

Safety precautions

Corrosive liquids:

Corrosive liquids may eventually produce leak paths around the sealing surfaces of the pump-head.

The pump should be inspected for leaks on a regular basis.

Mesures de sécurité

Liquides corrosifs:

Les liquides corrosifs peuvent éventuellement provoquer des fuites autour des surfaces d'étanchéité de la tête de pompe.

Il convient d'inspecter régulièrement la pompe afin de rechercher d'éventuelles fuites.

Trockenlauf:

Vor der Inbetriebnahme muss der Pumpenkopf mit Flüssigkeit gefüllt werden.

Zum Ansaugen darf der Pumpenkopf max. 15 Sek. trockenlaufen.

Dry running:

Before starting to run the pump we advise you to fill the pump-head with liquid.

Ensure that for priming the pump does not run dry for more than 15 sec.

Fonctionnement à sec:

Nous vous recommandons de remplir de liquide la tête de pompe avant de faire fonctionner la pompe.

Assurez-vous que la pompe ne fonctionne pas pendant plus de 15 secondes à sec pendant l'amorçage.

ISMATEC SA/REGLO OPF Analog/15.07.02//CB/GP



Sicherheitsvorkehrungen

- Es dürfen nur neue Sicherungen, die den Angaben auf Seite 15 entsprechen, verwendet werden.
- Der Sicherungshalter darf nicht überbrückt werden.
- Falls wegen Schlauchbruchs durch auslaufende Medien Schäden verursacht werden können, sind vor Inbetriebnahme die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Beim Pumpen aggressiver Medien empfehlen wir, die Pumpe in eine Auffangwanne zu stellen.
- Reparaturen dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.
- Durch Kunden bzw. Drittpersonen ausgeführte Arbeiten am und im Gerät erfolgen auf eigene Gefahr.
- Das Gehäuse darf während des Betriebes nicht geöffnet bzw. abgenommen werden.

Safety precautions

- Only new fuses, according to the specifications stated on page 15 in this manual, must be used.
- The fuse-holder must not be short-circuited.
- Tubing can tear and burst during operation. If this could cause damage, the necessary safety measures based on the specific situation must be taken. When pumping corrosive media we recommend to place the pump in a collecting basin.
- Repairs may only be carried out by a skilled person who is aware of the hazard involved.
- For service and repairs carried out by the customer or by third-party companies ISMATEC SA denies any responsibility.
- Do not open or remove the housing while the pump is operating.

Mesures de précaution

- N'utilisez que des fusibles neufs correspondant aux spécifications indiquées en page 15 du présent manuel.
- Le porte-fusible ne doit pas être court-circuité.
- En cours d'exploitation, les tubes peuvent se déchirer ou même éclater. Si cela pouvait causer des dommages, il faut prendre les mesures de sécurité adaptées à la situation spécifique. Pour le pompage de matières agressives, il est recommandé de placer la pompe dans une cuve de rétention.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par une personne connaissant parfaitement les risques liés à de tels travaux.
- ISMATEC SA décline toute responsabilité pour les dommages découlant de travaux d'entretien et de réparation assurés par le client ou par de tierces personnes.
- N'ouvrez pas et n'enlevez pas le boîtier pendant que la pompe fonctionne.

ISMATEC SA/REGILO CPF Analog/15.07.02/CB/GP

10





Garantie

Auf allen von ISMATEC® hergestellten Erzeugnissen
ab Lieferdatum: **2 Jahre**
Übrige Teile, ohne Verschleißmaterial: **1 Jahr**
Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihre ISMATEC®-Vertretung.

Warranty

For all parts manufactured by ISMATEC®
from date of delivery: **2 years**
All other parts, excluding consumables: **1 year**
In case of any queries, please contact your ISMATEC® representative.

Garantie

Pour toutes les pièces fabriquées par ISMATEC® à partir de la date de livraison **2 ans**
Autres pièces, sauf les pièces d'usure **1 an**
Pour toute demande, veuillez prendre contact avec votre représentant ISMATEC®.

ISMATEC SA/REGLO OPF Analog/15.07.02/1/CB/GP

Garantiebestimmungen

Wir garantieren eine einwandfreie Funktion unserer Geräte, sofern diese sachgemäß und nach den Richtlinien unserer Betriebsanleitung angeschossen und bedient werden. Sofern nachweislich Herstellungs- oder Materialfehler vorliegen, werden die fehlerhaften Teile nach unserer Wahl kostenlos in Stand gesetzt oder ersetzt. Die Rücksendung hat in der Original- oder einer gleichwertigen Verpackung zu erfolgen. Durch Inanspruchnahme einer Garantieleistung wird die Garantiezeit nicht beeinflusst. Weitergehende Forderungen sind ausgeschlossen. Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Unsere Garantie erlischt, wenn:

- das Gerät unsachgemäß bedient oder zweckentfremdet wird
- am Gerät Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden
- ein für das Gerät unangemessener Standort gewählt wird
- das Gerät umwelt- und elektrospezifisch unter Bedingungen eingesetzt wird, für die es nicht vorgesehen ist
- Software, Hardware, Zubehör oder Verbrauchsmaterial eingesetzt wird, welches nicht unseren Angaben entspricht.

Warranty terms

We warrant the perfect functioning of our products, provided they have been installed and operated correctly according to our operating instructions.

If production or material faults can be proved, the defective parts will be repaired or replaced free of charge at our discretion.

A pump must be returned in the original ISMATEC® packing or in a packet of equal quality. The duration of the warranty is not affected by making a claim for warranty service.

Further claims are excluded. Shipping costs are charged to the customer.

Our warranty becomes invalid

in the case of:

- improper operation by the user, or if the pump is diverted from its proper use
- unauthorized modification or misuse by the user or by a third party
- improper site preparation and maintenance
- operation outside of the environmental and electrical specifications for the product
- use of third-party software, hardware, accessories or consumables purchased by the user and which do not comply with our specifications.

Garantie

Nous garantissons un fonctionnement irréprochable de nos appareils sous conditions d'une mise en service compétente et correspondant à nos normes et notices d'emploi. Si un défaut de fabrication ou de matériau peut être prouvé, les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées gratuitement. Le renvoi doit être effectué dans l'emballage d'origine ou similaire.

La durée de la garantie n'est pas touchée par le fait que le client demande une prestation de garantie. Toute autre prétention est exclue. Les frais d'expédition sont facturés au client.

Notre garantie perd sa validité dans les cas suivants:

- manipulation inadéquate par l'utilisateur ou utilisation de l'appareil à des fins auxquelles il n'est pas destiné
- modifications non autorisées ou mauvais emploi par l'utilisateur ou un tiers
- préparation et entretien inadéquats de l'emplacement de l'appareil
- utilisation de la pompe en dehors de l'environnement et des spécifications électriques définies pour le produit
- utilisation de matériel, de logiciels, d'interfaces ou de produits de consommation tiers achetés par l'utilisateur et qui ne satisfont pas à nos spécifications.





Produkt

Die REGLO-CPF *Analog* ist eine ventillose Taumelkolbenpumpe.

Packungsinhalt

- Pumpenantrieb ISM 1014
- Netzkabel
- Betriebsanleitung
- Pumpenkopf wie bestellt

Product

The REGLO-CPF *Analog* is a valveless rotary piston pump.

Package:

- Pump drive ISM 1014
- Power cord
- Operating instructions
- Pump-head as ordered

Produit

REGLO-CPF *Analog* est une pompe à piston rotatif sans soupapes.

Contenu de l'emballage:

- Moteur de pompe ISM 1014
- Cordon d'alimentation
- Modes d'emploi
- Tête de pompe (conform. à votre commande)



Kopf 2-25 µl/Hub

- FMI 009 Keramikkolben
- FMI 010 Stahlkolben

Kopf 5-50 µl/Hub

- FMI 005 Keramikkolben
- FMI 013 LF = Low Flow

Kopf 10-100 µl/Hub

- FMI 007 Keramikkolben

Head 2-25 µl/stroke

- FMI 009 ceramic piston
- FMI 010 steel piston

Head 5-50 µl/stroke

- FMI 005 ceramic piston
- FMI 013 LF = Low Flow

Head 10-100 µl/stroke

- FMI 007 ceramic piston

Tête 2-25 µl/course

- FMI 009 piston céramique
- FMI 010 piston en acier

Tête 5-50 µl/course

- FMI 005 piston céramique
- FMI 013 LF = Low Flow

Tête 10-100 µl/course

- FMI 007 piston céramique



Produkt

Überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Transportschäden. Finden sich Anzeichen von Beschädigungen, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihre ISMATEC®-Vertretung.

Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware angenommen werden.

Product


Please check the package and its contents for transport damage. If you find any signs of damage, please contact your local ISMATEC® representative immediately.

Complaints can only be accepted within 8 days from receipt of the goods.

Produit

Veuillez contrôler l'emballage et son contenu et contacter immédiatement votre représentant ISMATEC® si vous deviez constater des dommages dus au transport.

Les réclamations éventuelles ne seront acceptées qu'au cours des 8 jours suivant la livraison.



ISMATEC SA/REGLO OPF Analog/15.07.02//CB/GP



Geräterückwand

- 1 Analogschnittstelle
- 2 Sicherungshalter mit Spannungswähler 115/230V
- 3 Netzbuchse

Rear panel

- 1 Analog interface
- 2 Fuse-holder with voltage selector 115/230V
- 3 Mains socket

Tableau arrière

- 1 Interface analogique
- 2 Porte-fusibles avec sélecteur de tension 115/230V
- 3 Prise d'alimentation

⚡ Netzspannung

Netzanschluss	Sicherung
220-240 V _{AC}	2 x 400 mA T
110-120 V _{AC}	2 x 800 mA T

⚡ Mains voltage

Mains voltage	Fuse rating
220-240 V _{AC}	2 x 400 mA)
110-120 V _{AC}	2 x 800 mA)
) slow-blow type	

⚡ Tension d'alimentation

Tension d'alimentation	Fusibles de sécurité
220-240 V _{AC}	2 x 400 mA)
110-120 V _{AC}	2 x 800 mA)
) à action retardée	

⚠ Steckdose/Netzkabel

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Originalkabel. Die Steckdose muss geerdet sein. (Schutzleiterkontakt)

⚠ Socket/Power cord

Use exclusively the originally supplied power cord. The socket must be earthed (protective conductor contact).

⚠ Prise/câble d'alimentation

N'employer que le câble d'alimentation d'origine. La prise doit être raccordée à la terre (contact conducteur de protection).

⚠ Vor der Inbetriebnahme

Prüfen Sie, ob die Spannungswahl-anzeige im Fenster des Sicherungshalters der Netzspannung Ihres Landes entspricht. Wenn nötig, muss die Einstellung geändert und die 2 Sicherungen müssen ausgetauscht werden.

⚠ Before starting-up

Check if the voltage setting visible in the window of the fuse-holder complies with your local mains voltage. If necessary, the voltage setting must be changed and the 2 fuses must be replaced.

⚠ Avant la mise en service


Contrôlez si la tension indiquée dans la fenêtre du porte-fusibles correspond à la tension de votre réseau local. Si nécessaire, modifiez la tension et remplacez les deux fusibles correspondants.

Fenster für Spannungswahl-anzeige
Window for voltage setting
Fenêtre de réglage de la tension





Spannungsumschaltung 115V / 230V und Sicherungen auswechseln

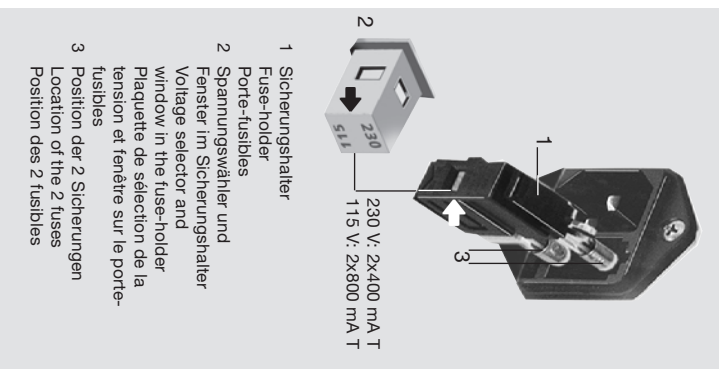

- 1 Sicherungshalter
Fuse-holder
Porte-fusibles
- 2 Spannungswähler und
Fenster im Sicherungshalter
Voltage selector and
window in the fuse-holder
Plaque de sélection de la
tension et fenêtre sur le porte-
fusibles
- 3 Position der 2 Sicherungen
Location of the 2 fuses
Position des 2 fusibles

ISMATEC SA/REGLO GPF Analog/15.07.02/1/CB/GP

Voltage setting 115V / 230V and changing the fuses

- ➔ Pumpe ausschalten,
Netzstecker ausziehen.
- 1 Sicherungshalter mit einem kleinen
Schraubenzieher
(Gr. 0) öffnen und herausziehen.
- 2 Spannungswähler herausnehmen
und mit gewünschten
Spannungswert gegen das Fenster
im Sicherungshalter gerichtet
wieder einrasten.
- 3 Neue Sicherungen (2 Stk.)
einsetzen
230 V_{AC}: 2 x 400 mA T
115 V_{AC}: 2 x 800 mA T
- Δ Immer 2 Sicherungen (träge)
vom selben Typ entsprechend der
ortsüblichen Netzspannung
einsetzen.
- 4 Sicherungshalter einschieben.
Spannungswert ist im Fenster
sichtbar.

Δ **Vor Inbetriebnahme**
Prüfen Sie, ob der im Fenster des Sicherungshalters sichtbare Spannungswert mit Ihrer lokalen Netzspannung übereinstimmt.

Commutation de la tension 115V / 230V et remplacement des fusibles

- ➔ Switch the pump off,
pull out the mains plug.
- 1 Pull out the fuse-holder by opening
it with a small screw-driver (size
0).
- 2 Take out the voltage selector
plate. Turn it and re-insert it into
the fuse-holder so that the
required voltage rating is facing
the window of the fuse-holder.
- 3 Insert 2 new fuses
230 V_{AC}: 2 x 400 mA (slow-blow)
115 V_{AC}: 2 x 800 mA (slow-blow)
- Δ Use always 2 slow-blow fuses
of the same type complying with
the local mains voltage.
- 4 Shut the fuse-holder. The voltage
rating is visible in the window.

Δ **Before starting-up**
Check if the voltage setting visible in the
window of the fuse-holder complies with your
local mains voltage.

- ➔ Eteindre la pompe. Déconnecter le
câble d'alimentation.
- 1 Extraire le porte-fusible en ouvrant
la pince supérieure et inférieure
par exemple avec un tournevis de
la taille 0.
- 2 Extraire la plaque de sélection
de la tension. La tourner et la
réinsérer dans le porte-fusibles de
manière à ce que la valeur de
tension souhaitée soit dirigée
contre la fenêtre du porte-fusibles.
- 3 Insérer deux nouveaux fusibles
230 V_{AC}: 2 x 400 mA (retard)
115 V_{AC}: 2 x 800 mA (retard)
- Δ N'employer toujours que deux
fusibles (retard) correspondants à
la tension du circuit local.
- 4 Fermer le porte-fusibles. La valeur
de tension est visible dans la fenêtre.

Δ **Avant la mise en service**
Contrôlez si la tension indiquée dans la
fenêtre du porte-fusibles correspond à la
tension de votre réseau local.

15



Inbetriebnahme


- 1 Am Digipot die gewünschte Drehzahl einstellen.
99 = 1800 min⁻¹ (max. Drehzahl)
→ Die Drehzahl kann auch bei laufender Pumpe verändert werden.
- 2 Drehrichtung wählen
- 3 Netzschalter ein
= Start/Stopp-Funktion
- 4 Überlastanzeige (rote LED)

Starting the pump

- 1 Set the required speed on the 2-digit speed selector.
99 = 1800 rpm (max. revolution)
→ The rotation speed can be adjusted while the pump is running.
- 2 Choose the rotation direction
- 3 Start the pump with the main switch = run/stop function
- 4 Overload indicator (red LED)

Mise en marche

- 1 Régler le nombre de tours souhaité sur le Digipot
99 = 1800 t/min (tours max.)
→ Le nombre de tours peut également être modifié en cours d'exploitation.
- 2 Sens de rotation
- 3 Interrupteur de réseau en marche = fonction marche et arrêt
- 4 Indicateur de surcharge (LED rouge)

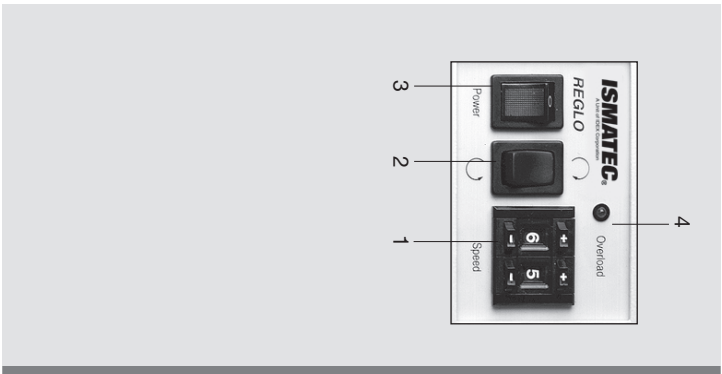


16

ISMATEC SA/REGLO CPF Analog/15.07.02/CB/GP





Fixierschraube für Skalierung
Fixing screw for flow control ring
Vis de fixation pour anneau gradué

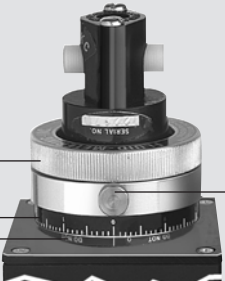

Gerändelter Einstellring
Knurled adjustment ring
Anneau de réglage moleté

schwarz/black/noir
Drehbarer Skalerring
Revolving flow control ring
Anneau gradué rotatif

rot/red/rouge
Fixer Skalerring
Fixed flow control ring
Anneau gradué fixe

Nullpunkt-Kalibrierung

Die Kalibrierung des Skalen-0-Punktes am Pumpenkopf wird bei erstmaliger Inbetriebnahme sowie bei Bedarf empfohlen.

- Starten Sie die Pumpe und pumpen Sie das entsprechende Medium.
- Drehen Sie bei laufender Pumpe den gerändelten Einstellring solange nach rechts, bis die Pumpe nichts mehr fördert (der Motor läuft weiter).
- Lösen Sie die Fixierschraube des drehbaren Skalerrings (schwarz) und stellen Sie diesen auf den Wert '0' ein.
- Ziehen Sie die Fixierschraube wieder fest.

Zero point calibration

Before using the pump the first time, or whenever necessary, we recommend you to calibrate the 0-point of the flow control ring.

- Start the pump and pump the liquid to be delivered.
- While the pump is in operation, turn the knurled adjustment ring to the right until the pump stops delivering the liquid (the motor is still running!).
- Loosen the fixing screw of the revolving flow control ring (black) and turn it to the value '0'.
- Tighten the fixing screw again.

Calibration du point zéro

Nous recommandons de calibrer le point zéro avant la première utilisation, ou chaque fois que cela est nécessaire.

- Mettez la pompe en marche et pompez le liquide à calibrer
- Pendant que la pompe fonctionne, tournez l'anneau de réglage rotatif vers la droite jusqu'à ce que la pompe cesse de refouler du liquide.
- Dévissez la vis de fixation de l'anneau gradué rotatif (noir) et réglez ce dernier à la valeur '0'.
- Vissez à nouveau fermement la vis de fixation.



Hubvolumen einstellen

Für die Einstellung des Hubvolumens drehen Sie den gerändelten Einstellring, bis der gewünschte Wert (0...450) an den beiden Skalenringen eingestellt ist.
(Die Fixierschraube darf nicht gelöst werden!)

Grundsätzlich gilt folgendes:

- **Kleines Hubvolumen/ große Drehzahl:**
 - geringere Pulsation
 - bessere Auflösung von Fließrate und Doservolumen
 - Neigung zur Kavitation (ungenügendes Nachfließen des Mediums)
- **Großes Hubvolumen/ kleine Drehzahl:**
 - für erhöhte Viskosität
 - bei Differenzdruck
 - geringere Auflösung der Fließrate.

Setting the stroke volume

For setting the stroke volume, turn the knurled adjustment ring till the desired value (0...450) on the fixed and revolving flow control ring appears.
(The fixing screw must not be loosened!)

Basically the following applies:


- **Small stroke volume/ high speed:**
 - low pulsation
 - better resolution of the flow rate and dispensing volume
 - tendency to cavitation (insufficient flow-through of the liquid in the pump-head)
- **Large stroke volume/ low speed:**
 - for elevated viscosity
 - for differential pressures
 - reduced resolution of the flow rate.

Réglage du volume de course

Pour le réglage du volume de course, il convient de tourner l'anneau de réglage jusqu'à ce que la valeur désirée (0...450) apparaisse.
(Ne pas desserrer la vis de fixation!)

Les règles suivantes sont applicables:

- **petit volume de course / vitesse élevée:**
 - faibles pulsations
 - meilleure résolution du débit et du volume dosé
 - tendance à la cavitation (débit de liquide insuffisant dans la tête de pompe)
- **grand volume de course / faible vitesse:**
 - pour viscosités élevées
 - pour pomper contre pression
 - résolution plus faible du débit.

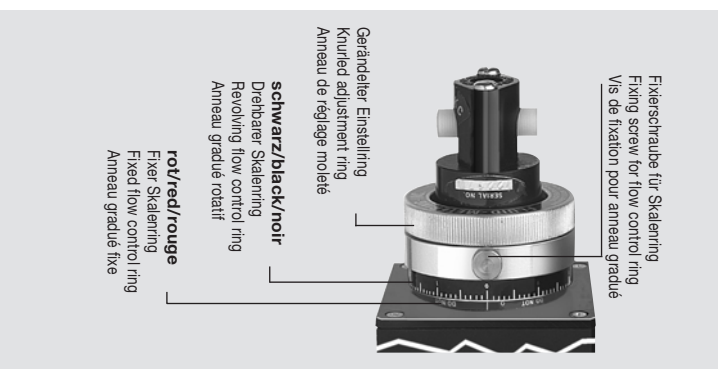

18



Überlastschutz

Die Pumpe REGLO-CPF *Analog* verfügt über eine Überlast-Sicherung. Bei aktiviertem Überlastschutz leuchtet die rote LED-Anzeige auf, und die Pumpe stoppt.

In einer solchen Situation ist die Pumpe sofort mit dem Netzschalter auszuschalten.

➔ Abkühlen lassen (es dauert ca. 2 Min., bis die Pumpe wieder betriebsbereit ist).

Bevor die Pumpe wieder gestartet wird ist unbedingt zu prüfen, was die Überlastung der Pumpe verursacht hat (z.B. zu hoher Differenzdruck).

➔ Erst nachdem die Ursache für die Überlast behoben worden ist, darf die Pumpe neu gestartet werden.

Overcurrent protector

The pump REGLO-CPF *Analog* features an overload protector. When an overload condition occurs, an activated overcurrent protector is indicated by the red LED and the pump is stopped.

Whenever this situation occurs, the pump must be switched off immediately.

➔ Let the pump cool down (it takes about 2 minutes until the pump is ready again).

Before the pump is re-started, it is most important to check the reason for the overload (eg. too high differential pressure).

➔ Only when the cause of the overload has been detected and the failure corrected accordingly may the pump be started again.

Protection de surcharge

La pompe REGLO-CPF *Analog* possède une protection de surcharge. Lorsque le dispositif de protection contre les surcharges est activé, la diode lumineuse rouge s'allume et la pompe s'arrête automatiquement.

Dans une telle situation, la pompe doit être immédiatement déclenchée.

➔ Laisser refroidir (la pompe est à nouveau prête à fonctionner après environ 2 min).

Avant d'enclencher à nouveau la pompe, il est indispensable de contrôler ce qui a pu provoquer la surcharge (p. ex. pression différentielle trop élevée).

➔ La pompe ne doit être remise en marche qu'après l'identification de la cause de la surcharge et la réparation correspondante du défaut.



Pumpen gegen Druck

Die REGLO-CPF *Analog* kann im Dauerbetrieb bis max. 6.9 bar Differenzdruck eingesetzt werden.

Pumping against pressure

The REGLO-CPF *Analog* can be used for continuous duty at a differential pressure of max. 6.9 bar (100 psi).

Pompage contre pression

En exploitation continue, la pompe REGLO-CPF *Analog* peut être employée jusqu'à 6.9 bar de pression différentielle au maximum.

Wenn die Pumpe ruht

Wir empfehlen, den Pumpenkopf **nach jedem Pumpvorgang zu spülen**, damit sich keine Reste zwischen Kolben und Zylinderwand festsetzen können (besonders beim Pumpen von salz-, eiweiß- oder partikelhaltigen Medien).

When the pump is idle

We recommend you to flush the pump-head **after every pumping process** to prevent the piston from seizing by remaining particles (especially after pumping media containing salt, protein or particles).

Durant les temps d'arrêt

Nous vous recommandons de rincer la tête de pompe **après chaque processus de pompage** afin d'éviter que des restes ne se fixent entre le piston et la paroi du cylindre (particulièrement après le pompage de liquides contenant des sels, des protéines ou des particules).



Analogschnittstelle

Pin 1, GND (Masse)
Bezugspotential für alle anderen Eingänge

Pin 2, remote
Für Umschaltung zwischen manueller Bedienung und der Analogschnittstelle. Zur Aktivierung der Analog-Schnittstelle muss Pin 2 mit Pin 1 (GND) verbunden werden.

Pin 3, start
Im Remote-Betrieb (Pin 2 auf GND) startet die Pumpe bei Verbindung mit Pin 1 (GND).

Pin 4, direction
Wenn offen, dreht die Pumpe im Gegenuhzeigersinn; wenn mit Pin 1 (GND) verbunden, dreht sie im Uhrzeigersinn.

Analog interface

Pin 1, GND (ground)
Reference potential for all other inputs

Pin 2, remote
For changing between manual control and analog interface. For activating the analog interface, pin 2 must be connected with pin 1 (GND).

Pin 3, start
In remote operation (pin 2 to GND) the pump starts when connected to pin 1 (GND).

Pin 4, direction
In the open position the pump turns counter-clockwise; when connected to pin 1 (GND) it turns clockwise.

Interface analogique

Pin 1, GND (masse)
Potential de référence pour toutes les autres entrées

Pin 2, remote
Pour commuter du service manuel à l'interface analogique. Pour activer l'interface analogique, le pin 2 doit être connecté au pin 1 (GND).

Pin 3, start
En exploitation à distance (pin 2 sur GND), la pompe se met en route dès qu'elle est connectée au pin 1 (GND).

Pin 4, direction
Si ouvert, le sens de rotation de la pompe est celui contraire des aiguilles d'une montre.; si relié avec le pin 1 (GND), elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.



ISMATEC SA/REGLO GPF Analog/15.07.02/1/CB/GP



Analogschnittstelle

Pin 5, speed IN
Externe Drehzahlsteuerung
(0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA)
Eingangsimpedanz und Wahlmöglich-
lichkeiten mittels DIP-Switch im
Geräteinnern (siehe Seite 24)

Pin 7, +22V_{DC}
Es stehen ca. +22 V_{DC} zur Verfügung
(max. Strom 0.2 A).

Pin 9, speed OUT
Frequenz proportional zur
Drehzahl: 0-9 KHz
(mit jeder Umdrehung des Kolbens
werden 500 Impulse erzeugt)

Analog interface

Pin 5, speed IN
External speed control
(0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA)
Input impedance and input range
can be selected via a dip-switch
inside the pump (see p. 24)

Pin 7, +22V_{DC}
About +22 V_{DC} are available (max.
current 0.2 A).


Pin 9, speed OUT
Frequency proportional to the
rotation speed: 0-9 KHz
(with each revolution of the piston,
500 impulses are generated)

Interface analogique

Pin 5, speed IN
Réglage externe du nombre de tours
(0–5V, 0–10V, 0–20mA, 4–20mA)
Impédance d'entrée et réglage de
zone au moyen de l'interrupteur DIP
à l'intérieur de l'appareil (voir p. 24)

Pin 7, +22V_{DC}
Environ +22 V_{DC} sont à disposition
(courant maximal 0.2 A).

Pin 9, speed OUT
Fréquence proportionnelle au nombre
de tours: 0-9 KHz
(avec chaque rotation du piston, 500
impulsions sont produites)

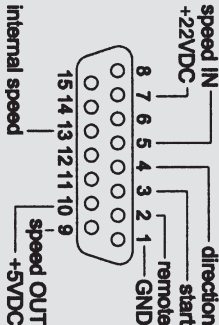

Digitale Eingänge (TTL-Pegel)
Digital inputs (TTL-level)
Entrées numériques (niveau TTL)
Pin 2, remote
Pin 3, start
Pin 4, direction
Pin 13, internal speed

Analog-Eingang
Analog input/ Entrée analogique
Pin 5, speed IN
0–5 V_{DC} / 0–10 V_{DC} / 0–20 mA / 4–20 mA
Analog-Ausgang (TTL-Pegel)
Analog output (TTL-level)
Sortie analogique (niveau TTL)
Pin 9, speed OUT 0-9 KHz





ISMATEC SA/REGLO CPF Analog/15.07.02/03/GP

Analogschnittstelle

Pin 10, +5V_{DC}
Es stehen ca. +5 V_{DC} zur Verfügung.
(max. Strom 0.1 A)

Pin 13, internal speed
Analogschnittstelle aktiviert
(Pin 2 auf GND)
– Pin 13 offen: Die Drehzahl wird über Pin 5 (speed IN) vorgegeben.
– Pin 13 auf GND: Die Drehzahl kann am Bedienungspanel der Pumpe eingestellt werden.

Analog interface

Pin 10, +5V_{DC}
About +5 V_{DC} are available.
(max. current 0.1 A)

Pin 13, internal speed
Analog interface activated
(Pin 2 on GND)
– Pin 13 open: The rotation speed is adjusted via pin 5 (speed IN).
– Pin 13 on GND: The rotation speed can be adjusted by the speed selector on the control panel of the pump.

Interface analogique

Pin 10, +5V_{DC}
Environ +5 V_{DC} sont à disposition
(courant maximal 0.1 A)

Pin 13, internal speed
Interface analogique activée
(Pin 2 sur GND)
– Pin 13 ouvert: La vitesse de rotation doit être ajustée par le pin 5 (speed IN).
– Pin 13 sur GND: La vitesse de rotation peut être ajustée par le sélecteur de vitesse sur le tableau de commande de la pompe.



Einstellungen Schalter S1

➔ Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe vom Netz getrennt ist.

Settings of switch S1

➔ Make sure that the pump is disconnected from the mains supply.


Réglages du switch S1

➔ Assurez-vous que la pompe soit déconnectée du réseau.

⚠ Das Gerät darf nur von einer Fachkraft geöffnet werden!
Spannungsführende Teile im Inneren des Gerätes können auch längere Zeit nach Ziehen des Netzsteckers noch unter Spannung stehen.

⚠ The instrument should only be opened by a qualified technician!
Capacitors inside the pump may still be charged even though the mains plug has been disconnected some time ago.

⚠ Cet appareil doit être ouvert par un spécialiste uniquement!
Des pièces conductrices peuvent encore être sous tension très longtemps après que le câble d'alimentation ait été débranché de la prise.

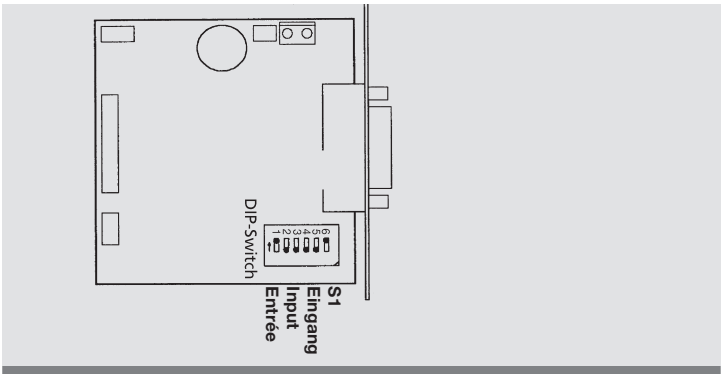

Pin 5 speed IN		Imp.	DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	DIP-Switch 3	DIP-Switch 4	DIP-Switch 5	DIP-Switch 6
0-5V		18k Ω	ON*	OFF*	OFF*	OFF*	OFF*	ON*
0-10V		38k Ω	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
0-20mA		250 Ω	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
4-20mA		250 Ω	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF

* Default-Einstellung

* Default setting

* Valeurs par défaut





Zubehör

Fußschalter
Bestell-Nr. ISM 891

Dieser Fußschalter dient als Impulsgeber zum Starten bzw. Anhalten der Pumpe. Er ist sehr nützlich, wenn die Pumpe als Dosiergerät zum Abfüllen von Röhrenchen, Gläsern, Flaschen usw. eingesetzt wird. Beide Hände bleiben für das Arbeiten mit Flaschen usw. frei.

PTFE Schläuche

1.6 mm iØ
3.2 mm aØ
mit 2 Fittings UNF 1/4-28 (männlich)

Länge	Bestell-Nr.
0.25 m	IC 0053
0.50 m	IC 0057
0.75 m	IC 0061
1.00 m	IC 0065

Accessories

Foot switch
Order No. ISM 891

This foot switch serves as a start/stop device.
It is very useful when using the pump as a dispenser for filling tubes, bottles, etc.
Both hands are free for handling the bottles and tubing.

PTFE Tubing

1.6 mm (1/16") i.d.
3.2 mm (1/8") o.d.
with 2 fittings UNF 1/4-28 (male)

Length	Order No.
0.25 m	IC 0053
0.50 m	IC 0057
0.75 m	IC 0061
1.00 m	IC 0065

Accessoires

Pédale de commande
No de commande ISM 891

Cette pédale de commande est utilisée pour enclencher et déclencher la pompe. Elle est très utile lorsque la pompe est utilisée comme appareil de dosage pour remplir des tubes, des flacons, etc.
Les deux mains sont ainsi libres pour travailler.

PTFE Tubes

1.6 mm diam. int.
3.2 mm diam. ext.
avec 2 raccords UNF 1/4-28 (mâle)

Longueur	No comm.
0.25 m	IC 0053
0.50 m	IC 0057
0.75 m	IC 0061
1.00 m	IC 0065



ISMATEC SA/REGLO OPF Analog/15.07.02/ICB/GP



⚠ Hinweis

Zur Erreichung der max. Fließraten ist das Hubvolumen auf den Maximalwert (25, 50 oder 100 µl) des jeweiligen Pumpenkopfes zu setzen.
Falls dieses Hubvolumen der Anwendung entsprechend reduziert wird, empfehlen wir jedoch, nicht unter 10% des Maximalwertes zu gehen.

⚠ Please note

In order to reach the max. flow rate, the stroke volume must be set to the max. value (25, 50 or 100 µl) depending on the pump-head model.
If, depending on the application, this stroke volume must be reduced we recommend you not to go below 10% of the maximum value.

⚠ Remarque

Pour obtenir le débit maximum, le volume de course maximum doit être réglé sur la valeur maximum (25, 50 ou 100 µl) correspondant à la tête de pompe utilisée.
Si pour votre application ce volume de course doit être réduit, nous recommandons de ne pas aller en dessous de 10 % de la valeur maximale.

■ 26

Fließraten / Flow rates / Débits							
Pumpenkopf Pump head Tête de pompe	2 – 25 µl FMI 009 / FMI 010		5 – 50 µl FMI 005		10 – 100 µl FMI 007		
	min ⁻¹ rpm	t/min	18	1800	18	1800	
Skalening Flow control ring Anneau gradué	Fließraten Flow rates/Débits ml/min		Fließraten Flow rates/Débits ml/min		Fließraten Flow rates/Débits ml/min		
	min	max	min	max	min	max	
50	0.05	5	0.1	10	0.2	20	20
100	0.10	10	0.2	20	0.4	40	40
150	0.15	15	0.3	30	0.6	60	60
200	0.20	20	0.4	40	0.8	80	80
250	0.25	25	0.5	50	1.0	100	100
300	0.30	30	0.6	60	1.2	120	120
350	0.35	35	0.7	70	1.4	140	140
400	0.40	40	0.8	80	1.6	160	160
450	0.45	45	0.9	90	1.8	180	180

ISMATEC SA/REGLO CPF Analog/15.07.02/CB/GP





Unterhalt

Wir empfehlen, den Pumpenkopf nach jedem Pumpvorgang zu spülen, damit sich keine Reste zwischen Kolben und Zylinderwand festsetzen können (besonders beim Pumpen von salz-, eiweiß- oder partikelhaltigen Medien).

Sonst erfordert die REGLO-CPF *Analog* keinen speziellen Unterhalt und keine mechanischen Einstellungen.

Achten Sie darauf, dass keine abrasiven Festkörper in den Pumpenkopf gelangen.

Maintenance

We recommend the user to flush the pump-head thoroughly after pumping in order to prevent the piston from seizing by remaining particles (especially when media has been pumped that contained salt, proteins or particles).

Otherwise, the REGLO-CPF *Analog* requires no particular maintenance or mechanical adjustments.

Avoid pumping media containing abrasive solids.

Entretien

Nous recommandons aux utilisateurs de rincer généreusement la tête de pompe après le pompage de manière à éviter que le piston ne soit grippé par des particules résiduelles (en particulier après le pompage de milieux comportant des sels, des protéines ou d'autres particules).

En dehors de ces recommandations, la REGLO-CPF *Analog* ne nécessite ni entretien, ni réglage mécanique particuliers.

Évitez que des solides abrasifs ne traversent la pompe.

ISMATEC SA/REGLO CPF *Analog*/15.07.02//CB/GP



Hinweis

Betreffend Service, Reparatur und Garantie des Pumpenkopfes verweisen wir auch auf die beiliegenden Instruktionen des Pumpenkopferstellers. Im Zweifelsfalle gilt diese Anleitung.

Please note

For maintenance, service, repairs and warranty of the pump-head we also refer to the enclosed instruction manual of the pump-head manufacturer. In case of doubt that manual shall prevail.

Attention

En ce qui concerne l'entretien, le service technique, les réparations et la garantie relative à la tête de pompe, veuillez vous référer également au mode d'instruction d'origine ci-joint du fabricant de la tête de pompe. En cas de doute, c'est ce manuel qui fait foi.

Service und Reparaturen

Wie jedes Gerät besitzt auch die REGLO-CPF *Analog* Komponenten, die sich innerhalb einer gewissen Zeit abnutzen.

Für Reparaturen senden Sie die komplette Pumpe mit umfassender Beschreibung des Defekts an Ihre ISMATEC®-Vertretung. Bitte verwenden Sie die Original- oder eine gleichwertige Verpackung.

Service and repairs

Like all pumps, the REGLO-CPF *Analog* contains components that will wear over a period of time.

For repairs send the complete pump with detailed description of the failure to your ISMATEC® distributor. Please use the original ISMATEC® packing or a packet of equal quality.

Service technique et réparations

Comme toutes les pompes, la pompe REGLO-CPF *Analog* contient des composants qui s'useront au cours du temps.

Pour tout travail de réparation, envoyer la pompe complète avec une description détaillée du défaut constaté à votre revendeur ISMATEC®. Veuillez employer l'emballage d'origine ou similaire.



Ersatzteile

Für Reparaturen, die Sie selbständig ausführen wollen (außerhalb der Garantiezeit) erhalten Sie von Ihrer ISMATEC®-Vertretung:

- Kolben-/Zylindereinheit
Typ Bestell-Nr.
H-00CKC-LF FMI 311
H-00SKY-LF FMI 310
H-0CKC FMI 307
H-1CKC FMI 308
- Kolbendichtungen
(2 Stück benötigt)
Typ Bestell-Nr.
H408-00J (RH00) FMI 325
H408-0A (RH0) FMI 312
H408-1A (RH1) FMI 319
- Stücklisten
- Ersatzteile Pumpenantrieb
- Verdrahtungspläne

Bitte geben Sie Defekt, Kaufdatum, Serien-Nr. und Typ an.

Replacement parts

For repairs you intend to carry out by yourself (out of the warranty period), you can ask from your ISMATEC® distributor for:

- Piston-/cylinder group
Type Order No
H-00CKC-LF FMI 311
H-00SKY-LF FMI 310
H-0CKC FMI 307
H-1CKC FMI 308
- Lip seals (2 pieces are needed)
Type Order No
H408-00J (RH00) FMI 325
H408-0A (RH0) FMI 312
H408-1A (RH1) FMI 319
- Parts lists
- Replacement parts for pump drive
- Wiring diagrams

Please give information on defect, date of purchase, serial-no., and model.

Pièces détachées

Pour les travaux de réparation que vous désirez effectuer vous-même (en dehors de la période de garantie), vous pouvez demander à votre revendeur ISMATEC®:

- Groupe piston / cylindre
Type No de commande
H-00CKC-LF FMI 311
H-00SKY-LF FMI 310
H-0CKC FMI 307
H-1CKC FMI 308
- Joints de pistons (2 pcs sont nécessaires)
Type No de commande
H408-00J (RH00) FMI 325
H408-0A (RH0) FMI 312
H408-1A (RH1) FMI 319
- des pièces détachées
- des listes de pièces
- des schémas de connexion

Veuillez fournir des informations concernant la panne, la date de l'achat, le numéro de série et le modèle.



ISMATEC SA/REGLO GPF Analog/15.07.02//CB/GP



Technische Daten

Antrieb	DC-Motor
Motor typ	
Fließrate und Drehzahl	
Hubvolumen	Fließrate
max. 25 µl	0.045–45 ml/min
max. 50 µl	0.09–90 ml/min
max. 100 µl	0.18–180 ml/min
Drehzahl	
18–1800 min ⁻¹ , einstellbar in Schritten von 1%.	
Differenzdruck	
max. 6.9 bar	
Netzanschluss	
115 V _{AC} / 60 Hz	
230 V _{AC} / 50 Hz	
Absicherung	
2 x 400 mA, träge (230 V _{AC})	
2 x 800 mA, träge (115 V _{AC})	
Leistungsaufnahme	
max. 50 W	

Technical Specifications

Drive	DC motor
Motor type	
Flow rate and speed	
Stroke volume	Flow rate
max. 25 µl	0.045–45 ml/min
max. 50 µl	0.09–90 ml/min
max. 100 µl	0.18–180 ml/min
Speed	
18–1800 rpm, digitally adjustable in steps of 1%.	
Differential pressure	
max. 6.9 bar (100 psi)	
Mains connection	
115 V _{AC} / 60 Hz	
230 V _{AC} / 50 Hz	
Fuse rating	
2 x 400 mA, slow-blow (230 V _{AC})	
2 x 800 mA, slow-blow (115 V _{AC})	
Power consumption	
max. 50 W	

Spécifications techniques

Moteur	moteur CC
Type de moteur	
Débit et vitesse	
Volume de course	Débit
max. 25 µl	0.045–45 ml/min
max. 50 µl	0.09–90 ml/min
max. 100 µl	0.18–180 ml/min
Vitesse	
18–1800 t/min, digitalement réglable par pas de 1 %.	
Pression différentielle	
max. 6.9 bar	
Connexion au réseau	
115 V _{AC} / 60 Hz	
230 V _{AC} / 50 Hz	
Type de fusibles	
2 x 400 mA, retardé (230 V _{AC})	
2 x 800 mA, retardé (115 V _{AC})	
Consommation de courant	
max. 50 W	

ISMATEC SA/REGILO CPF Analog/15.07.02/CB/GP





Hinweis

Beachten Sie ebenfalls unsere Garantie- und allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bitte setzen Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten mit Ihrer lokalen ISMATEC®-Vertretung in Verbindung.

Please note

We also recommend you to observe our Warranty Terms as well as our Terms and Conditions of Sale.

In case of any queries, please contact your local ISMATEC® representative.

Remarque

Veuillez lire également nos conditions de garantie, nos conditions générales de vente ainsi que nos conditions de livraison.

Pour toute demande, veuillez prendre contact avec votre représentant ISMATEC®.

ISMATEC SA/REGLO GPF Analog/15.07.02/1/CB/GP

Technische Daten

Schutzgrad
IP 30

Betriebsbedingungen
Temperatur +5 bis +40°C
Rel. Feuchtigkeit max. 80%
nicht kondensierend, normale Laborbedingungen

Maße/Gewicht
TxBxH 250x100x135mm
Gewicht 2.5 kg

CE-Konformität
geprüft nach:
EN 61326-1
EN 60010-1

Technical Specifications

Protection rating
IP 30

Operating conditions
Temperature +5°C to +40°C
(+41°F to 104°F)
Rel. humidity max. 80%
not condensing, at normal laboratory conditions

Dimensions/Weight
DxWxH 250x100x135mm
(9.8 x 3.9 x 5.3 inches)
Weight 2.5 kg (5.5 lb)

CE-compatibility
proved according to:
EN 61326-1
EN 60010-1

Spécifications techniques

Classe de protection
IP 30

Conditions d'utilisation
Température de +5 à +40°C
Humidité relative au max. 80 %
sans condensation, sous des conditions de laboratoire normales

Dimensions/Poids
PxLaxH 250x100x135mm
Poids 2.5 kg

Compatibilité CE
conformément à:
EN 61326-1
EN 60010-1



ISMATEC SA

Labortechnik - Analytik
A Unit of IDEX Corporation
Feldegstrasse 6
CH-8152 Glattbrugg-Zürich
Switzerland

Phone +41 (0)1 874 94 94
Fax +41 (0)1 810 52 92
E-Mail sales@ismatec.ch
Internet www.ismatec.com

ISMATEC

Laboratoriumstechnik GmbH

A Unit of IDEX Corporation

Futtererstrasse 16
D-97877 Wertheim-Mondfeld
Germany

Phone +49 (0) 93 77 / 92 03-0
Fax +49 (0) 93 77 / 13 88
E-Mail office@ismatec.de

ISMATEC® Vertretung/Representative/Représentation



Verlangen Sie den
neuen ISMATEC-
Katalog.

Ask for the latest
ISMATEC catalogue.

Demandez le catalogue
ISMATEC actuel.



ISMATEC®

IDEX
CORPORATION

ISMATEC® - Ihr kompetenter Partner für anspruchsvolle Pump- und
Dosieraufgaben.

ISMATEC® - Your competent partner for demanding metering and
dispensing applications.

ISMATEC® - Votre partenaire compétent pour toutes les applications
de refoulement et de dosage exigeantes.