





Absolute Tubes

Votre meilleur choix pour vos échantillons :
les Eppendorf Tubes®

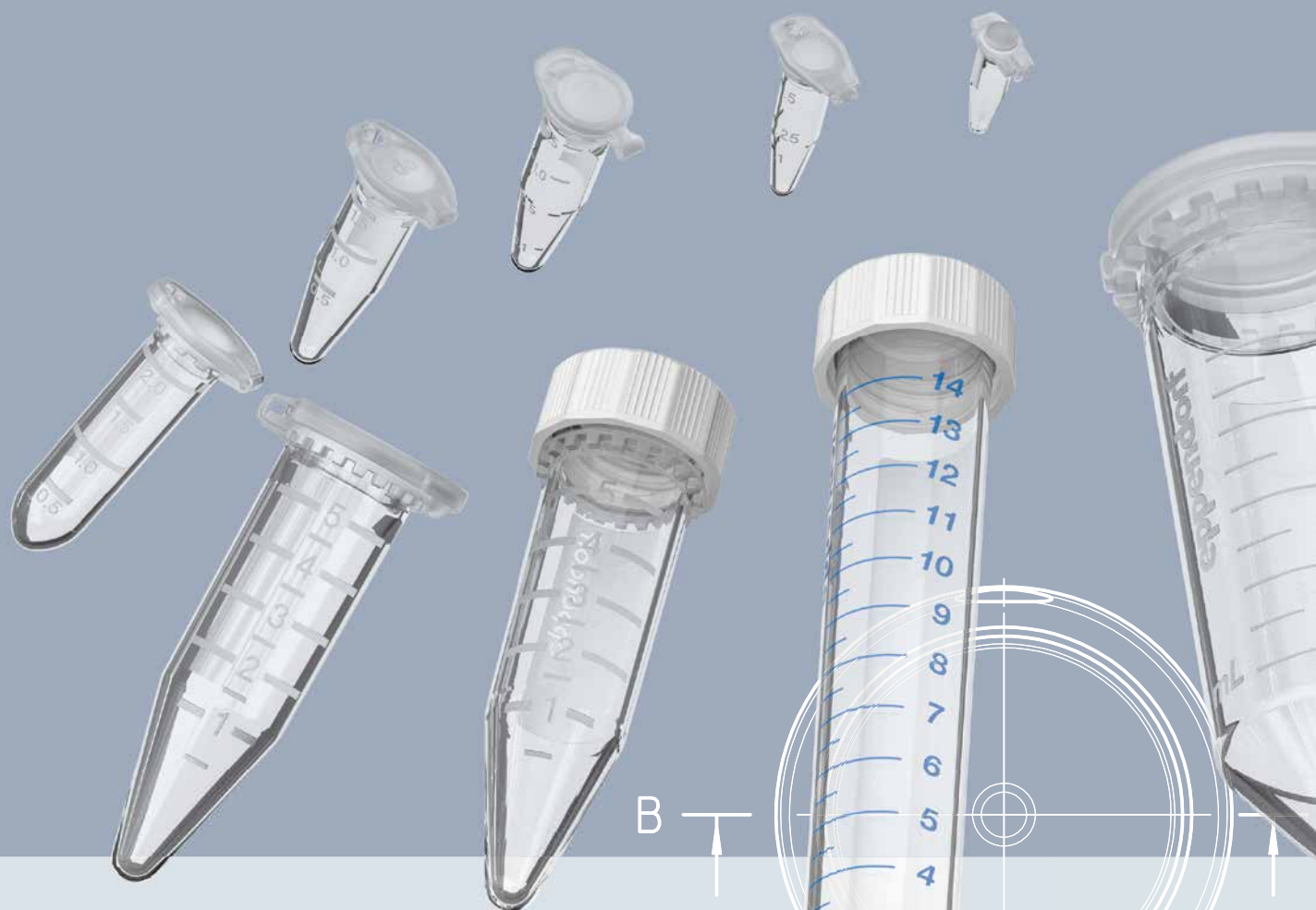

Prenez-en soin

La plupart des laboratoires de biologie utilisent couramment des ustensiles à usage unique en plastique. En vue d'une fiabilité et d'une homogénéité maximales de vos expériences, Eppendorf a optimisé les matériaux et les processus dans la fabrication des Eppendorf Tubes afin de minimiser les risques d'interférences. En particulier les substances chimiques telles que les agents anti-adhérents, les plastifiants ou les biocides qui s'échappent des consommables en plastique sont encore souvent sous-estimées dans la majorité des applications de biologie. Cependant, il est de plus en plus établi que ce groupe hétérogène de produits chimiques peut affecter les expériences et constituer une source d'erreurs dans de nombreux systèmes d'essais. Ils ralentissent l'évaporation, faussent les valeurs d'absorbance et entraîne des erreurs dans la quantification de l'ADN. Il a été également montré que certains de ces agents lubrifiants avaient une influence négative sur le résultat de tests biologiques tels que les essais d'activité enzymatique ou de fixation sur les récepteurs.

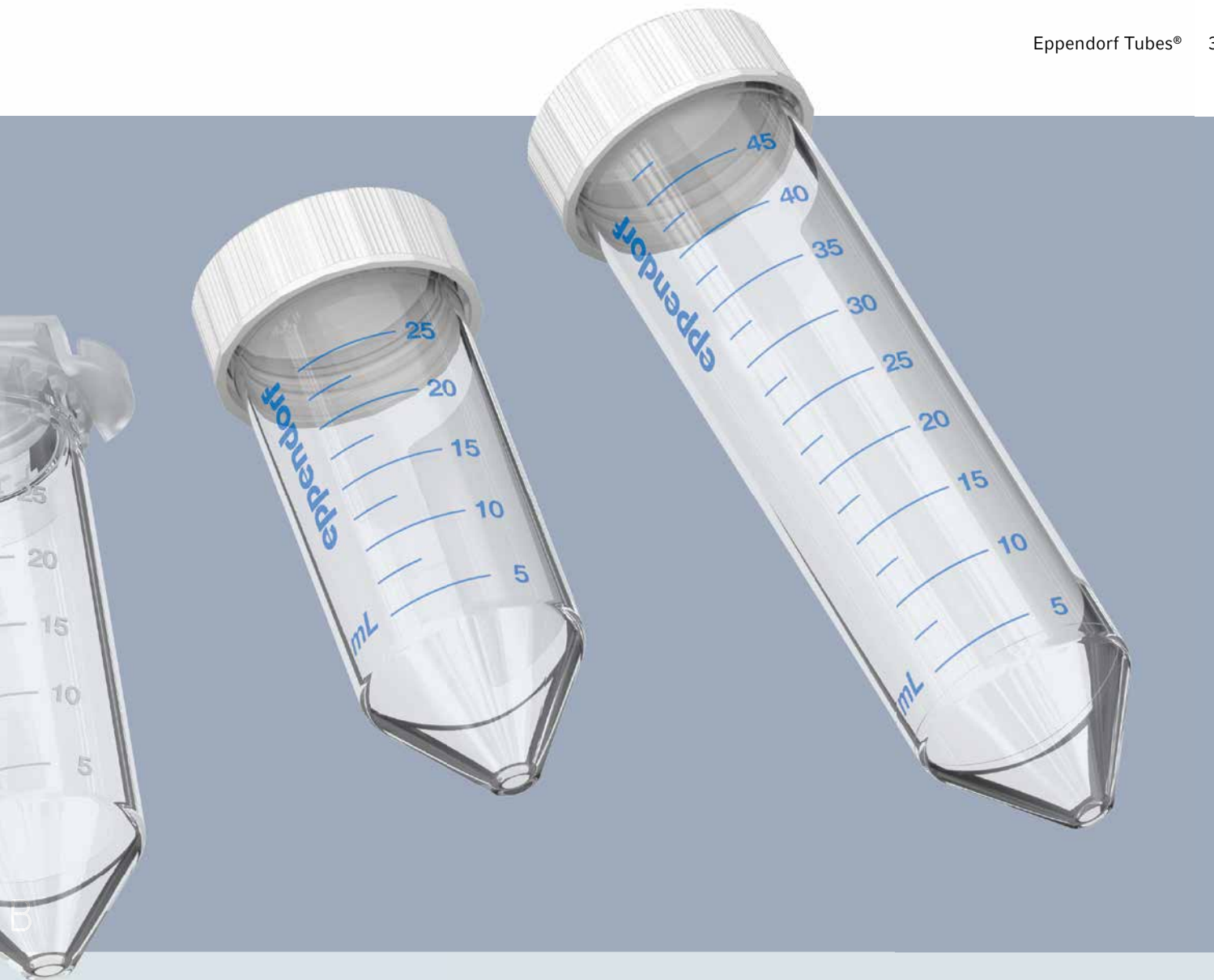

Eppendorf Tubes®

- > Fabriqués en polypropylène (PP) vierge de la plus haute qualité, sans biocides, plastifiants ni latex.
- > Produits dans des moules optimisés, finement polis sans agents anti-adhérents tels que l'oléamide, l'érucamide ou le stéaramide
- > Produits avec des colorants ne contenant aucun additif organique ni métal lourd
- > Conçu et fabriqué selon le système de gestion certifié ISO 13485 et ISO 9001
- > La traçabilité complète est assurée pour chaque produit jusqu'au lot de matériel

Un degré de pureté sur mesure pour vos besoins

Eppendorf a défini de nouvelles normes en termes de degrés de pureté des consommables. En plus du haut standard de l'Eppendorf Quality™, quatre degrés de pureté supplémentaires permettent aux Eppendorf Tubes de répondre à différents besoins d'application. – Sterile (sans pyrogènes, sans ARNase, sans ADNase, sans ADN humain ou bactérien), PCR clean, Forensic DNA Grade et Biopur®. Les tubes de ces degrés de pureté sont testés par un laboratoire externe indépendant pour vérifier leur conformité. Les certificats spécifiques par lot délivrés par ce laboratoire peuvent être téléchargés sur www.eppendorf.com/certificates



Guide de sélection des degrés de pureté Eppendorf pour les tubes

					
	Eppendorf Quality™	Sterile	PCR clean	Forensic DNA Grade*1	Biopur®*1
Contrôle qualité continu pour les critères pertinents suivants					
Fonction, étanchéité, précision	■	■	■	■	■
Faible mouillabilité	■	■	■	■	■
Haute résistance aux produits chimiques	■	■	■	■	■
Haute résistance thermique	■	■	■	■	■
Haute stabilité de centrifugation*2	■	■	■	■	■
Haute transparence	■	■	■	■	■
Usiné avec précision	■	■	■	■	■
Testé par lot (certifié) pour les critères de pureté suivants					
Sans ADN humain			■	■	■
Sans ADN (humain + ADN bactérien)					■
Sans ADNase			■	■	■
Sans ARNase			■	■	■
Sans inhibiteur de PCR			■	■	■
Sans ATP					■
Exempt de pyrogène (exempt d'endotoxine)		■			■
Sterile (Ph.Eur./USP)		■			■
Méthodes (exemples)					
Applications nécessitant une qualité générale élevée mais pas de puretés spéciales contrôlées	■				
Cultures de bactéries et de levures		■			■
Culture cellulaire et tissulaire		■			■ ■
Extraction et stockage d'ADN			■ ■	■ ■	■
Isolation et stockage de l'ARN			■	■	■ ■
Analyse d'ADN (PCR, analyse de restriction, hybridation, séquençage, NGS)			■ ■	■ ■	■
Analyse d'ADN mitochondrial				■ ■	■ ■
Analyse d'ADN bactérien					■ ■
Analyse d'ARN				■	■ ■
Eppendorf Tubes®					
Tubes Safe Lock	■		■	■	■*1
3810X	■		■		
Eppendorf Tubes® 5.0 mL	■	■	■	■	■*1
Tubes coniques de 15 mL et 50 mL		■*3		■*1	
Tubes coniques 25 mL	■	■*3	■		
Tubes LoBind ADN et protéines			■		
Tubes de PCR (PCR + PCR en temps réel)			■	■	
Bandes à capuchons (PCR + PCR en temps réel)			■	■	

■ Recommandé ■ ■ Hautement recommandé

*1 Sécurité augmentée grâce à la disponibilité des produits emballés / encapsulés individuellement.

*2 Pour des détails précis concernant la résistance à la centrifugation, veuillez consulter le mode d'emploi individuel du produit.

*3 Sterile, exempt de pyrogènes, d'ADNase, d'ARNase, d'ADN humain et bactérien.

Eppendorf Tubes® 3810X – L'original

Avantages pour le client

- > La fonctionnalité est garantie de -86 °C à 100 °C
- > Vérification simple du volume pipeté grâce à une graduation claire
- > Toutes les versions peuvent être autoclavées pour une utilisation ultérieure dans un environnement stérile (121 °C, 20 min.)
- > Fabriqués sans agents anti-adhérents, plastifiants ni biocides
- > Haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes - fabriqués en polypropylène vierge
- > Le couvercle du tube est facile à ouvrir pour une manipulation ergonomique
- > Étiquetage facile sur le couvercle givré et la surface latérale
- > Disponible en degrés de pureté Eppendorf Quality et PCR clean
- > Des certificats de pureté spécifiques à un lot sont disponibles pour PCR clean sur www.eppendorf.com/certificates

C'est le successeur du célèbre premier tube de microcentrifugeuse 3810 d'Eppendorf. L'idée de fabriquer une éprouvette en plastique de 1,5 mL est née de la nécessité d'une cuve appropriée pour les analyseurs cliniques automatiques développés par Eppendorf en 1962. Sa conception éprouvée et ses caractéristiques inestimables lui confèrent une étanchéité parfaite, une excellente stabilité chimique et des matériaux de construction optimaux pour résister aux exigences des forces centrifuges.

Grâce à leur facilité d'ouverture et de fermeture, les Eppendorf Tubes 3810X offrent confort et fiabilité pour la préparation, la centrifugation et le stockage des échantillons. Une seule cuve pour toutes les applications en biologie moléculaire, chimie et biochimie : plus sûrs que jamais, les Eppendorf Tubes 3810X peuvent être centrifugés à 30 000 x *g* sans aucun problème !



Le tube 3810X garantit une fermeture du couvercle à l'étanchéité éprouvée.



Safe-Lock Tubes – Un nom, une histoire


Le couvercle original Eppendorf Safe-Lock

Comment reconnaître les Eppendorf Safe-Lock Tubes – l'«Eppi®» original ? Une caractéristique unique de nos tubes est le "ep" sur le couvercle entouré de notre nom de marque en relief "Eppendorf".



Une performance d'application de premier plan

Plus sûr que jamais. Des tests à 30 000 x g ont montré que les tubes pouvaient se casser pendant la centrifugation, mais pas les Eppendorf Safe-Lock Tubes, les célèbres «Eppis®». Selon la version, les Safe-Lock Tubes sont garantis résistants à des forces jusqu'à 30 000 x g, ce qui vous permet de centrifuger de manière sûre sans perte d'échantillons.

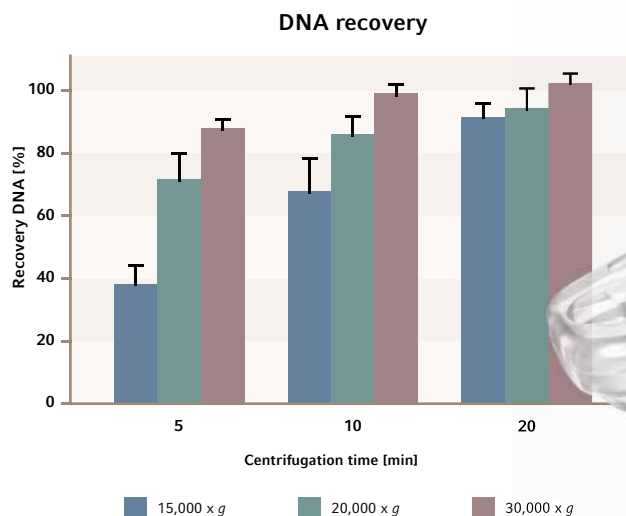

Il a été démontré que la centrifugation à 30 000 x g dans une précipitation in d'ADN plasmidique permettait de meilleurs taux de récupération et des temps de récupération plus courts. L'effet de la force centrifuge relative (rcf), de la durée de la centrifugation et de la quantité d'isopropanol sur le taux de récupération de l'ADN plasmidique à partir de la précipitation alcoolique a été étudié avec le système Eppendorf 30 000 x g comprenant des Safe-Lock Tubes et la Centrifuge 5430 R à rotor rapide. Les trois facteurs jouent un rôle, la rcf ayant l'effet le plus important. À 30 000 x g, environ 90% de l'ADN a pu être récupéré après 5 minutes de centrifugation.



Eppi® 0,5, 1.5 et 2,0 mL – Inégalé depuis des décennies



Les Eppendorf Safe-Lock Tubes en 0,5 mL, 1,5 mL et 2 et 2,0 mL combinent toute notre expérience accumulée en plusieurs décennies d'optimisation et de développement. Les Safe-Lock Tubes d'origine protègent votre échantillon avec une excellente stabilité à la centrifugation, possèdent des propriétés d'étanchéité parfaites et empêchent de manière fiable l'évaporation de l'échantillon. Le couvercle à charnière des Safe-Lock Tubes évite tout risque de fuite même dans des conditions extrêmes et le crochet du couvercle empêche l'ouverture du tube. Une sécurité élevée est assurée lors du travail avec des échantillons coûteux ou toxiques, ou avec des substances radioactives.

Avantages pour le client

- > Le couvercle à charnière de l'Eppendorf Safe-Lock empêche l'ouverture involontaire du couvercle durant l'incubation et le stockage
- > Haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes ; fabriqué en polypropylène vierge
- > Fabriqué sans agents anti-adhérents, plastifiants ni biocides
- > *g*-Safe® pour une stabilité de centrifugation exceptionnelle jusqu'à 30 000 x *g* pour éviter la perte d'échantillons en cas de rupture de tuyau et pour une sécurité supplémentaire
- > Faible taux d'évaporation lors d'un stockage de longue durée grâce à l'étanchéité parfaite du couvercle
- > Étiquetage facile sur le couvercle givré et la surface latérale
- > La fonctionnalité est garantie de -86 °C à 100 °C
- > Toutes les versions peuvent être autoclavées pour l'utilisation dans un environnement stérile (121 °C, 20 min.)
- > Tous les volumes sont disponibles en Eppendorf Quality et PCR clean, Eppendorf Forensic DNA Grade, Biopur
- > Des certificats de pureté spécifiques à un lot sont disponibles pour PCR clean sur www.eppendorf.com/certificates
- > Récupération maximum des échantillons avec les Safe-Lock Tubes dans Eppendorf Protein LoBind et DNA LoBind
- > La protection des échantillons sensibles à la lumière est assurée par les Safe-Lock Tubes de couleur ambre.




Le chaînon manquant – Eppendorf Tubes® 5,0 mL

En 2013 de nouveau, Eppendorf a défini une norme de laboratoire. Le lancement du Eppendorf Tube 5,0 mL a offert la solution à un problème rencontré par les clients qui travaillent avec des volumes de plus de 2,0 mL jusqu'à un maximum de 5,0 mL. Des tubes coniques de 15 mL étaient disponibles pour les gros volumes, mais chaque fois que le client voulait traiter des volumes d'échantillons moyens, il se heurtait à un problème : un volume d'échantillon comparativement faible devait être traité avec des formats de tubes

inutilement grands, peu pratiques et souvent sujets à la contamination. Le tube de 5,0 mL est le chaînon manquant entre les versions de tubes existantes et il permet un traitement facile et sûr des volumes d'échantillons jusqu'à 5,0 mL. La disponibilité des formats de capuchons pression et de capuchons à vis permet un choix optimal pour différentes exigences dans la préparation, l'incubation, le stockage ou d'autres applications.

Intelligent et simple, systématiquement !

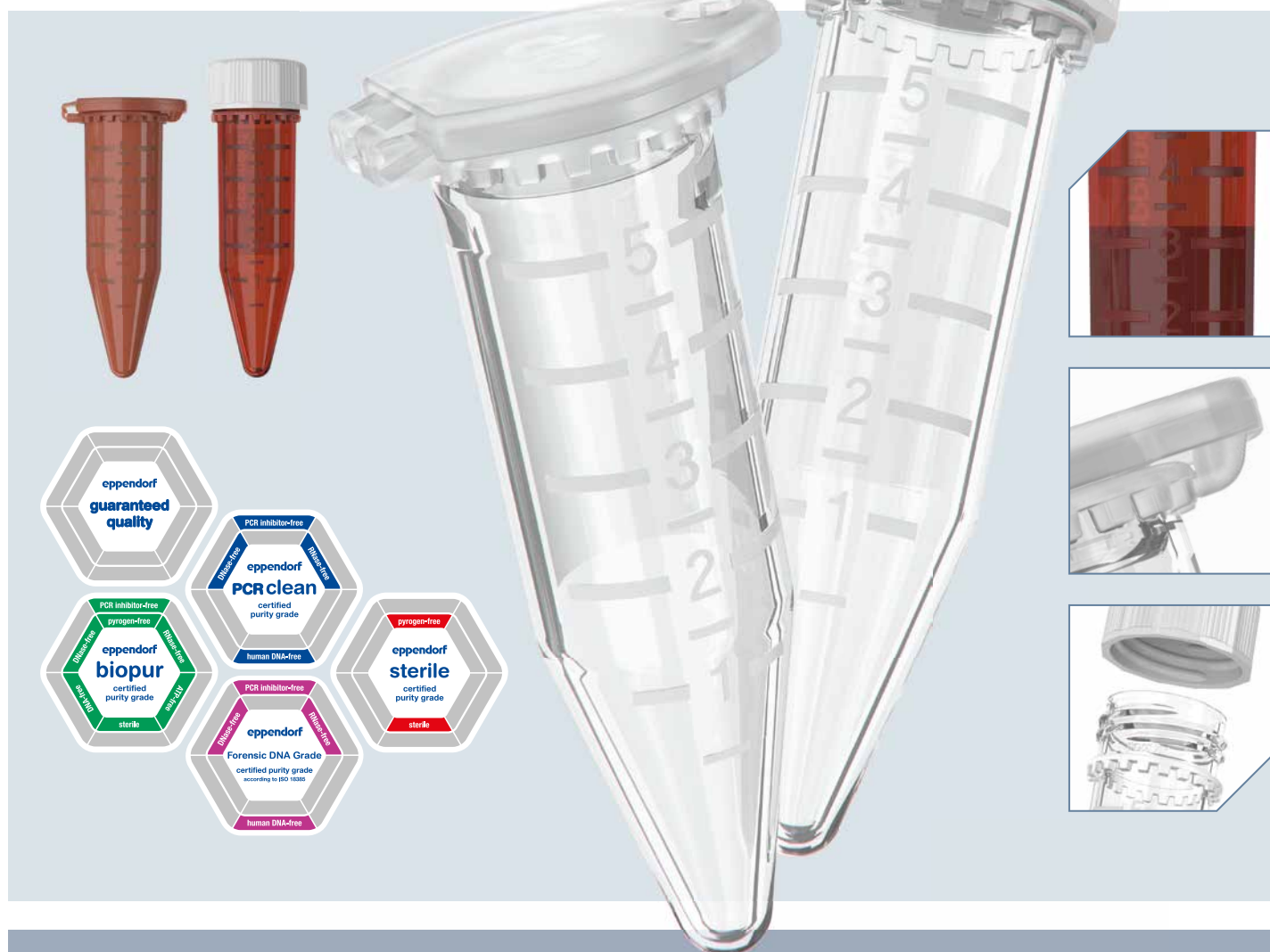

> Code QR pour la note d'application 262 »récolte augmentée avec l'isolation d'un plasmide à faible nombre de copies au moyen des Eppendorf Tubes® 5,0 mL en comparaison avec les formats 1,5 mL 2,0 mL«
 > Vous trouverez davantage de notes d'application sur www.eppendorf.com/5mL

Un système de composants complet

Gamme d'accessoires complète

Le concept du système 5,0 mL constitue une solution complète pour le travail de laboratoire. Il comprend une vaste gamme d'accessoires assortis : pipetage efficace et facile, mélange en douceur, incubation, centrifugation sûre, pipetage et stockage automatiques : tout fonctionne parfaitement avec les Eppendorf Tubes 5,0 mL. La forme conique du tube est conçue pour être compatible avec la plupart des accessoires pour les tubes coniques courants de 15 mL. Cela vous permet de continuer à utiliser un grand nombre des adaptateurs et racks que vous possédez déjà !

Avantages pour le client

- > Facilite significativement le traitement des échantillons jusqu'à 5,0 mL
- > La forme conique du tube est conçue pour être compatible avec la plupart des accessoires pour les tubes coniques courants de 15 mL.
- > Moins d'espace de stockage nécessaire
- > Stockage des échantillons et des solutions liquides jusqu'à 5 mL
- > Accessoires assortis pour la centrifugation, le mélange et le chauffage, l'automatisation, la préparation et le stockage des échantillons disponibles pour une utilisation immédiate.
- > **Matériau Eppendorf Protein et DNA LoBind pour une récupération maximum des échantillons Nouveau !**
- > **Ambre pour échantillons sensibles aux UV Nouveau !**
- > Disponible avec un capuchon pression et capuchon à vis
- > Disponible dans les degrés Eppendorf Quality, Sterile, PCR clean, Biopur, Eppendorf Forensic DNA

Centrifugation



Centrifuge 5920 R :

Rotor S-4xUniversal-grand pour 96 tubes de 5,0 mL tubes, jusqu'à 4 402 × g



Centrifuge 5910 R :

Rotor S-4xuniversal avec adaptateur universel pour 68 tubes de 5,0 mL, jusqu'à 4 324 × g

Centrifugeuses avec rotors pour 15 mL tubes coniques avec capuchon à vis :
adaptateur 8 pièces pour 8 tubes de 5,0 mL

Chauffage et mélange



Eppendorf ThermoMixer® C et Eppendorf ThermoStat™ C

Eppendorf SmartBlock™ pour 8 tubes de 5,0 mL



MixMate®:

Support de tube 5/15 mL, pour 8 tubes coniques de 5/15 mL

Stockage des échantillons



Tube Rack 5/15 mL :
pour 12 tubes



Clip de tube 5,0 mL :

pour attacher le couvercle de tube dans les applications de 80 °C à 100 °C



Boîtier de conservation en polypropylène :
pour 25 tubes de 5,0 mL



> Pour plus d'informations sur les tubes 5,0 mL :
Cliquez ou scannez www.eppendorf.com



The Next Level – Eppendorf Conical Tubes 25 mL

Très souvent, il faut préparer, centrifuger, mélanger ou stocker des volumes d'échantillons supérieurs à 15 mL mais bien inférieurs à 50 mL.

C'est pour cette raison qu'Eppendorf a développé les nouveaux Eppendorf Conical Tubes 25 mL. Ce nouveau membre de la grande famille des tubes Eppendorf comble l'écart entre les volumes des tubes coniques traditionnels de 15 mL et 50 mL. Le tube conique de 25 mL a le même diamètre que celui de 50 mL mais est moins long. Ainsi, la profondeur d'insertion des pipettes dans le tube est beaucoup plus faible qu'avec un tube conique de 50 mL. Le nouveau tube 25 mL est disponible avec capuchon à vis ou avec le capuchon SnapTec™ innovante. Cette solution de couvercle brevetée représente une solution unique sur le segment des tubes coniques.



Avantages pour le client

- > Accès facile à l'échantillon, même avec des pipettes de faible volume et pointes sans risque de contamination croisée
- > Stabilité de centrifugation jusqu'à $17\,000 \times g$ * pour les deux versions de tube, capuchon SnapTec et capuchon à vis
- > Ouverture et fermeture d'une seule main de la version à capuchon SnapTec pour l'extraction ou l'ajout rapide de liquide
- > Moins d'espace de rangement nécessaire
- > Assure -86 °C à 100 °C *
- > Accessoires assortis pour la centrifugation, le mélange et le chauffage, l'automatisation, la préparation et le stockage des échantillons disponibles pour une utilisation immédiate
- > Le tube SnapTec est autoclavable *

* Veuillez noter les instructions d'utilisation pour plus de détails (www.eppendorf.com/manuals): "Eppendorf Conical Tubes 25 mL, snap cap" et "Eppendorf Conical Tubes 15, 25 et 50 mL"



Un système de composants complet



Traitement des échantillons amélioré

Un diamètre plus grand et une hauteur plus basse que celles des tubes coniques de 15 mL permettent un meilleur accès à l'échantillon et une remise en suspension plus rapide des pastilles après centrifugation.



Utilisation d'une seule main

Assure un traitement optimisé et plus rapide des solutions d'échantillons, en particulier dans les protocoles à plusieurs étapes



Centrifugation

Centrifugation jusqu'à 17 000 x g * avec des rotors pour tubes coniques 50 mL, par exemplesérie 59xx et série 58xx :
Deux versions d'adaptateur pour tubes de 25 mL à capuchon pression et à capuchon à vis permettent l'utilisation dans des rotors et des godets 50 mL



Chauffage et mélange

Eppendorf ThermoMixer C et Eppendorf ThermoStat C :

L'adaptateur pour tubes 25 mL assure la compatibilité avec l'Eppendorf Smart-Block 50 mL



MixMate® :

Support de tube 25/50 mL, pour 4 tubes coniques de 25/50 mL



Stockage des échantillons

Support pour un tube :

Idéal pour peser les échantillons sur la balance et pour manipuler les échantillons individuellement. La fente de regard permet d'observer le niveau de remplissage à tout moment.



Tube Rack 25 mL :

Les racks Eppendorf pour tubes coniques 50 mL peuvent être utilisés avec les nouveaux tubes 25 mL



Boîtier de conservation en polypropylène :

Sa hauteur plus basse permet de ranger avec un encombrement réduit jusqu'à 9 tubes de 25 mL dans des boîtes de rangement Eppendorf de 3,5 pouces



> Pour plus d'informations sur les tubes 25 mL :
Cliquez ou scannez www.eppendorf.com/25mL



Eppendorf Conical Tubes 15 mL et 50 mL

Les tubes coniques avec bouchon à vis font partie des formats de tubes de laboratoire les plus couramment utilisés et sont universellement utilisés dans une grande variété de procédures de laboratoire. Les applications typiques comprennent la préparation, la manipulation, le stockage et le transport de divers échantillons et réactifs, la centrifugation et le mélange, différentes incubations, la culture cellulaire et bien d'autres encore. Généralement, ils doivent résister à une grande variété de conditions et assurer une bonne intégrité et la sécurité des échantillons et des utilisateurs.

Les Eppendorf Conical Tubes 15 mL et 50 mL offrent la meilleure combinaison de stabilité de centrifugation et d'étanchéité du bouchon à vis. Les deux tubes présentent des niveaux minimaux de lixiviables, ce qui en fait les tubes idéaux pour un large éventail d'applications exigeantes.


La disponibilité de différents degrés de pureté vous permet de minimiser le risque de contamination. Les tubes coniques 15 et 50 mL sont également disponibles en Protein LoBind et DNA LoBind. Protein LoBind empêche l'adsorption non spécifique de molécules de protéines ou de peptides sur les surfaces en polymère. DNA LoBind maximise la récupération des échantillons d'acides nucléiques en réduisant significativement la liaison de l'échantillon à la surface.

Les tubes coniques Eppendorf de couleur ambrée 15 mL /50 mL combinent une protection efficace des échantillons sensibles à la lumière avec un haut degré de transparence. Vous avez ainsi un contrôle total sur la profondeur d'insertion de la pointe de votre pipette.




> Code QR pour la note d'application 343 – »Comparaison des Eppendorf Conical Tubes : étanchéité du capuchon, stabilité de centrifugation et niveaux de lixiviables«.

> Pour en savoir plus : www.eppendorf.com/Conical-Tubes

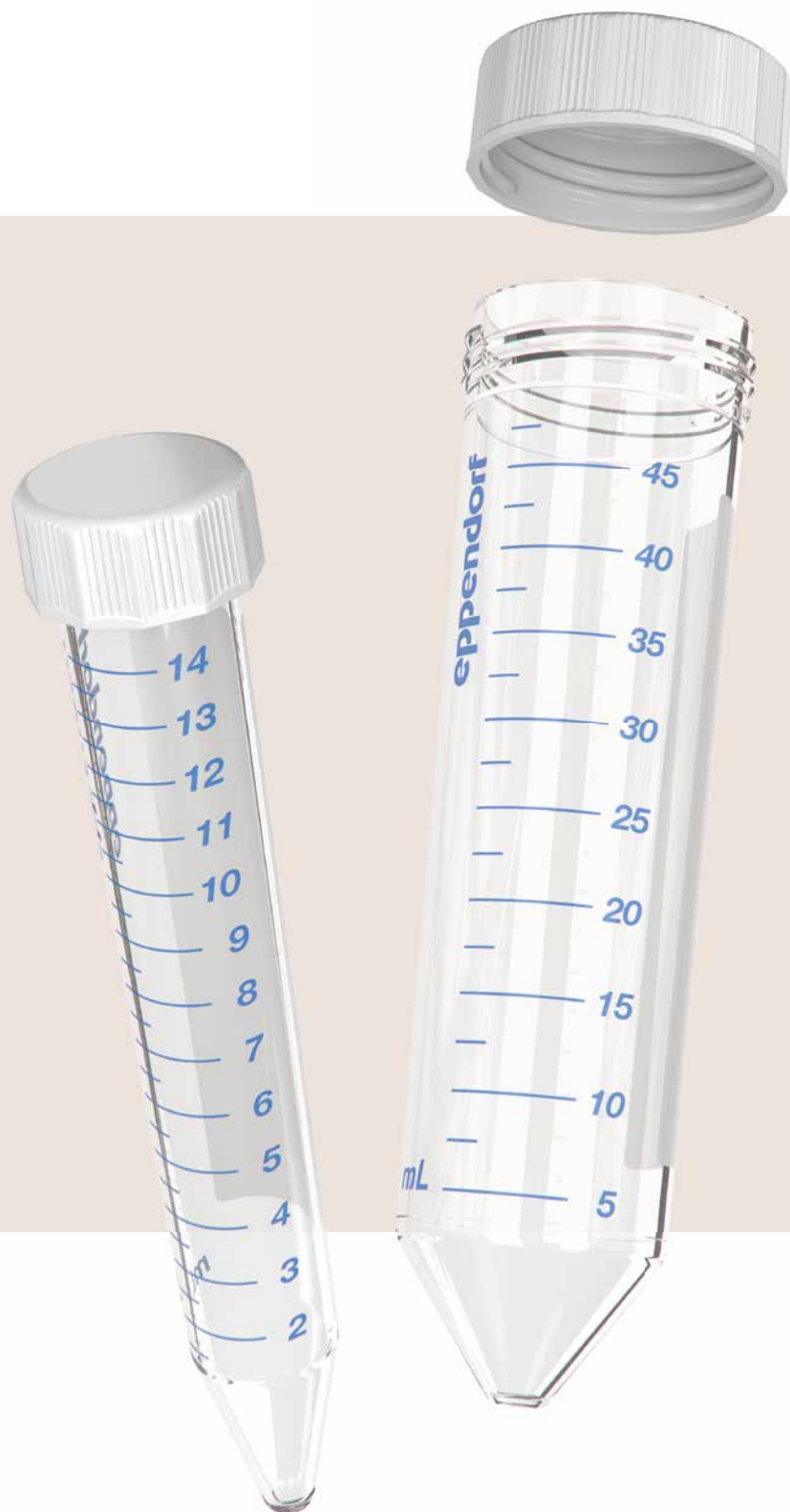

- > Les dimensions précises permettent une compatibilité maximale avec les rotors de centrifugation, mélangeurs et agitateurs
- > Vous avez ainsi un contrôle total sur la profondeur d'insertion de la pointe de votre pipette
- > La matière première de première qualité et l'absence d'agents anti-adhérents, de plastifiants et de biocides lors de la fabrication assurent
 - une intégrité maximale de l'échantillon
 - Stabilité élevée à la centrifugation jusqu'à 19 500 x g
 - une visibilité optimale de l'échantillon et des granules
 - des certificats de pureté spécifiques au lot sont disponibles.

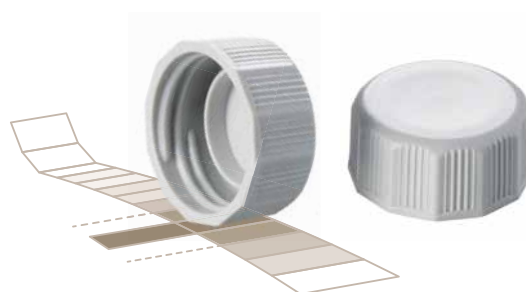


Capuchon avec côtés aplatis et rainurés

- > Offre une manipulation ergonomique et conviviale
- > Permet un positionnement stable et vertical
- > Minimise le risque de contamination



DNA LoBind – Récupérez vos acides nucléiques

En particulier lorsqu'il s'agit de faibles concentrations d'acides nucléiques, l'adsorption de l'échantillon sur les surfaces internes des tubes ne peut être ignorée. Par exemple, pour les flux de travail comprenant des étapes de préparation d'échantillons pour des applications PCR, la perte d'ADN sur les surfaces des tubes peut affecter la performance des différentes étapes de traitement et peut conduire à une mauvaise interprétation des résultats. Les tubes LoBind DNA maximisent la récupération des échantillons d'acides nucléiques en réduisant de manière significative la liaison surface-surface. Ils constituent la solution idéale pour la préparation et le stockage d'échantillons contenant de faibles quantités d'ADN. Pour réduire le risque d'interférence avec les échantillons, les propriétés DNA LoBind sont obtenues sans revêtement de surface.

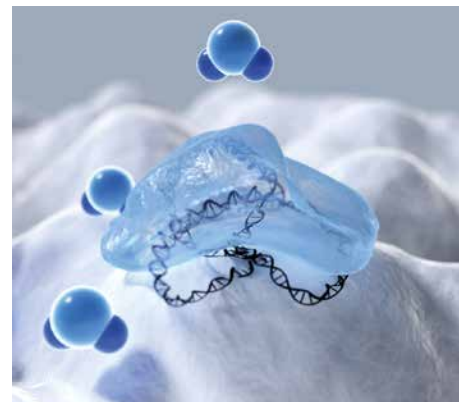

Applications


- > Préparation ou stockage des échantillons d'ADN et d'ARN
- > Analyse médico-légale
- > Préparation d'une série de dilution en qPCR quantitative
- > Préparation d'échantillons en séquençage nouvelle génération
- > Création de bibliothèques de génomes ou d'oligonucléotides



Tous les LoBind Tubes d'Eppendorf sont exempts de revêtement de surface (par exemple silicone) pour minimiser le risque d'interférences.

Protein LoBind – Tirez le maximum de vos applications

La préparation et le stockage des protéines représentent des étapes critiques pour un grand nombre d'applications de laboratoire. L'adsorption non spécifique de jusqu'à 90 % des molécules de protéines ou de peptides sur la surface en polymère des parois internes des tubes peut contribuer de manière significative à la perte d'échantillon en 24 heures et affecter artificiellement les résultats expérimentaux. L'adsorption non spécifique de jusqu'à 90 % des molécules de protéines ou de peptides sur la surface polymère des parois internes des tubes peut contribuer de manière significative à la perte d'échantillon en 24 heures et affecter artificiellement les résultats expérimentaux. Un mélange spécial de polymères à deux composants crée une surface hydrophile qui garantit un taux de récupération optimal des échantillons précieux.

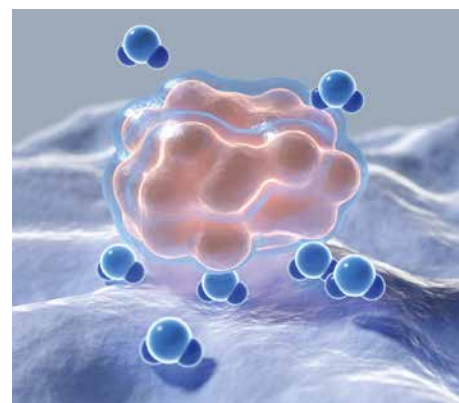

Applications

- > Préparation/stockage des échantillons de protéines, de peptides ou d'anticorps
- > Essais enzymatiques - la surface hydrophile réduit la dénaturation lorsque l'enzyme entre en contact avec la paroi interne du tube.
- > Prévention de la perte d'échantillon lors du stockage
- > Stockage de cellules en suspension
- > Préparation d'échantillons en toxicologie



> Note d'application 382 – «Analyse comparative des taux de récupération des protéines dans les tubes Eppendorf LoBind® et autres tubes »Low Binding«

> Note d'application 404 – «récupération totale d'échantillon dans les Eppendorf Protein LoBind Conical Tubes«





Protection efficace contre la lumière avec les tubes ambrés

De nombreux types de réactifs et d'échantillons sensibles à la lumière sont souvent utilisés dans la routine de laboratoire. Une fois exposés à la lumière, leur durée de vie ou leur activité peut rapidement diminuer et, par conséquent, nuire aux essais et expériences ultérieurs. Pour éviter ces difficultés, les réactifs et les échantillons sensibles à la lumière doivent être manipulés et stockés à l'abri de la lumière directe. Les tubes en plastique de laboratoire de couleur ambrée réduisent ou bloquent complètement la transmission de la lumière et permettent ainsi le rangement et la manipulation sûrs des échantillons sensibles à la lumière.

Protection contre la lumière et transparence


Tout en offrant une bonne protection des échantillons contre la lumière, ces tubes présentent souvent un inconvénient majeur : Ils sont opaques et ne permettent donc pas une visibilité optimale de l'échantillon. Nous avons développé spécifiquement pour nos tubes à bouchon à vis de 5 mL et nos tubes coniques de 15 mL et 50 mL notre matériau ambré avec un degré de transparence optimisé pour permettre un contrôle total des profondeurs d'insertion des pointes de pipettes, un avantage clair en matière de visibilité, de manipulation et de prévention de la contamination des échantillons.

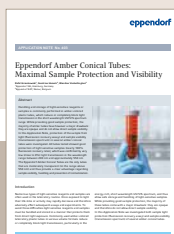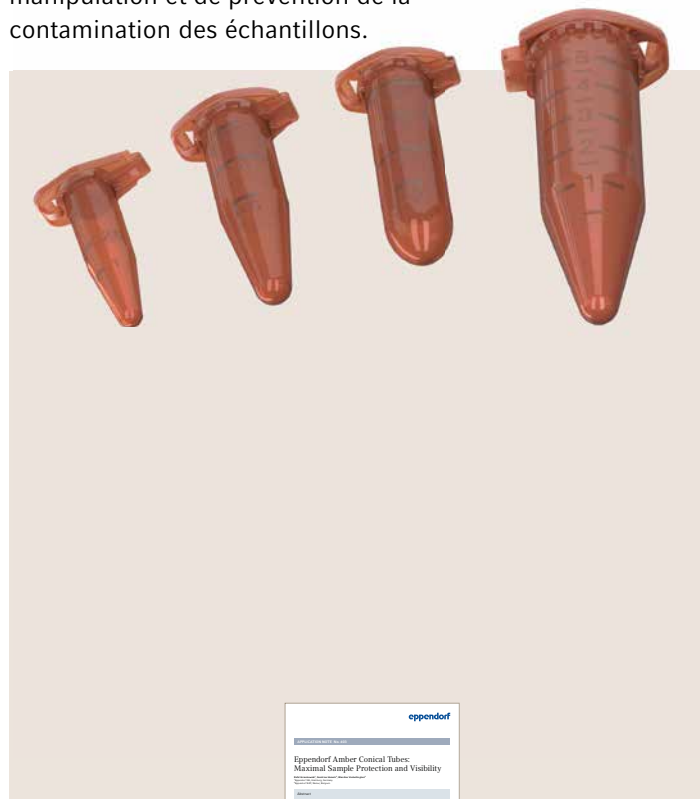

> Note d'application n°403 – »Eppendorf Amber Conical Tubes : Protection et visibilité maximales des échantillons«



Racks de tubes Eppendorf bien organisés

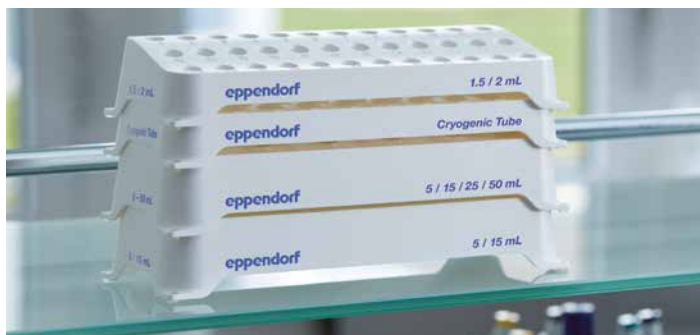

Optimisez vos flux de travail grâce à la manipulation facile d'échantillons clairement disposés. Presque tous les protocoles utilisés en laboratoire nécessitent un traitement, un transport et un stockage de courte durée efficaces et fiables des tubes d'échantillons dans des racks de paillasse. Les nouveaux Eppendorf Tube et Cuvette Racks allient une fonctionnalité optimisée et une grande robustesse à un design attrayant. Six formats différents offrent la solution optimale et s'adaptent parfaitement à tous les tubes et cuves couramment utilisés dans les laboratoires.

Encombrement minimal grâce aux dimensions compactes

Avantages pour le client

- > Pour un gain de place optimal, tous les racks peuvent être superposés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- > Les boutons en silicone assurent une bonne assise
- > Fabriqués en polypropylène (PP) de haute qualité :
 - Bonne stabilité dimensionnelle grâce à une grande plage de températures (-86 ° C à 121 ° C)
 - Résistance chimique
- > Les racks sont adaptés au lavage de laboratoire pour un nettoyage rapide et facile.
- > Les racks sont autoclavables (121 °C/20 min) et conviennent donc aux flux de travail nécessitant un environnement stérile, par exemple les applications de manipulation de cellules.



Notre système pour le stockage des échantillons

Le concept modulaire complet des boîtes de stockage Eppendorf pour tubes de 0,5 ml à 50 ml permet de choisir la combinaison de boîtes optimale pour tous les besoins de stockage. Les dimensions extérieures (133 mm) sont compatibles avec la plupart des systèmes de portoirs de congéla-

teurs. Les différentes variantes de grilles intérieures s'adaptent parfaitement à tous les formats de tubes typiques : tubes cryogéniques, tubes pour microcentrifugeuses, tubes coniques et autres tubes de laboratoire.

Flexibilité


- > Profitez pleinement de l'espace du congélateur grâce à son faible encombrement. Des possibilités de combinaison flexibles pour différents formats de boîtes optimisent le stockage et l'archivage des échantillons.
- > Les boîtes conservent leur forme lors du refroidissement à -86°C ou de l'autoclavage pendant 20 minutes à 121°C pour la stérilisation

Simplicité d'utilisation

- > Identification aisée de l'échantillon grâce à l'attribution d'un code laser alphanumérique individuel à chaque emplacement d'échantillon.
- > Bonne lisibilité grâce au fort contraste entre les codes foncés et la surface gris clair
- > Longue durée de vie de l'étiquetage permanent
- > 5 étiquettes supplémentaires permettent un étiquetage personnalisé
- > Couverts transparents pour l'inspection facile et rapide des échantillons
- > Ouverture et fermeture faciles pour une bonne ergonomie

Consignes générales de sécurité

- > Les boîtes à tubes coniques Eppendorf 15 mL et 50 mL assurent un refroidissement réparti de manière égale grâce aux fentes de ventilation sur les côtés des boîtes. Cela empêche les dommages et bris de tubes.

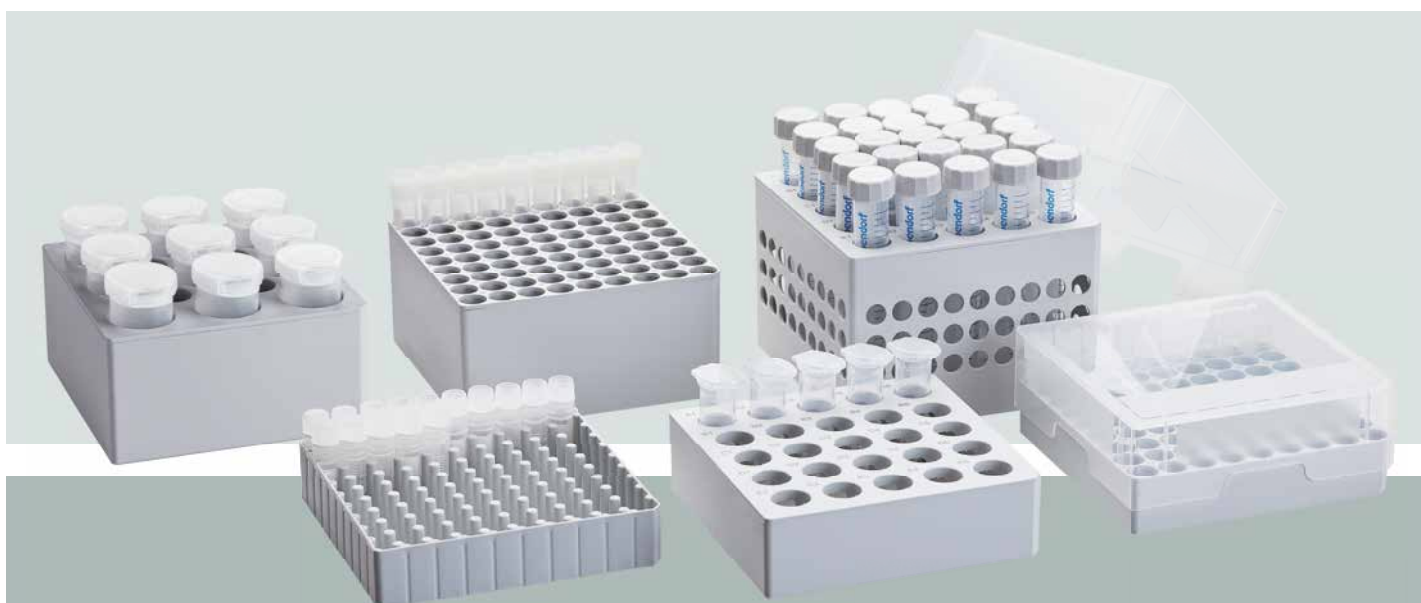

Eppendorf PCR Tubes

Les tubes de PCR Eppendorf sont fabriqués selon les plus hautes normes de qualité Eppendorf. Ces tubes en polypropylène à paroi mince assurent un transfert de chaleur efficace et homogène. Ils sont faciles à ouvrir, mais assurent

une étanchéité parfaite pour éviter l'évaporation pendant la PCR. Grâce à l'épaisseur de paroi fine et régulière et à la surface lisse de la paroi, le transfert de chaleur vers l'échantillon est efficace.



Eppendorf PCR Tubes, 0,2 mL

- > Couvercle à charnière contre la contamination
- > Position définie du couvercle grâce à une charnière spéciale
- > Haut degré de transparence même à la base du tube
- > Couvercle découpé pour l'étiquetage
- > Utilisables sur thermocycleurs avec un format de bloc de 0,2 mL
- > Également disponible au format bande à 8 tubes
- > Certifié par lot sans ADN humain, ADNase, ARNase et inhibiteurs de PCR *



Eppendorf PCR Tubes, 0,5 mL

- > Couvercle découpé pour l'étiquetage
- > Parfaitement étanche mais facile à ouvrir
- > Pour utilisation avec tous les thermocycleurs avec un format de bloc de 0,5 mL
- > Certifié par lot sans ADN humain, ADNase, ARNase et inhibiteurs de PCR *



Eppendorf PCR Tube Strips

- > 8 tubes de réaction au format bande – idéal pour les petits volumes d'échantillon
- > Facilement adaptable pour l'automatisation
- > Scellable à l'aide de couvercles de bande plats ou bombés
- > Certifié par lot sans ADN humain, ADNase, ARNase et inhibiteurs de PCR *



Cap Strips

- > Bandes avec huit micro-capuchons pour bandes de tubes de PCR
- > Scellage facile et rapide des bandes de tubes de PCR Eppendorf
- > Les bandes à capuchons plats conviennent pour la PCR en temps réel
- > Autoclavable (121 °C, 20 min)



Masterclear® Cap Strips et *real-time* PCR Tube Strips

- > Puits blancs pour une meilleure réflexion
- > Haute stabilité mécanique
- > Parois extrêmement minces pour un transfert de chaleur optimal
- > Bandes à capuchons concaves pour réduire le volume des tubes
- > Bandes à capuchons optimisés pour un maximum de transmission de la lumière

*Téléchargez les certificats sur www.eppendorf.com/certificates





Eppendorf Handling Solutions

Liquid Handling
Cell Handling
Sample Handling

Rendre votre travail de laboratoire plus facile et plus efficace : c'est avec cet objectif à l'esprit que nous développons des produits et des solutions dans les domaines de la Manipulation de Liquides, de la Manipulation de Cellules et de la Manipulation d'Échantillons. Rendez-vous sur l'espace en ligne Solutions de Manipulation Eppendorf pour vous plonger dans le domaine de votre choix et enrichir votre savoir tout en prenant du bon temps : www.eppendorf.com/handling-solutions



Liquid Handling



En 1961, Eppendorf lançait la première pipette à piston. Aujourd'hui, notre offre de produits en manipulation des liquides va des pipettes manuelles aux pipettes électroniques, des distributeurs et burettes aux systèmes de pipetage automatisés. Les produits Eppendorf combinent technologie de pointe, ergonomie optimale et design primé, qu'il s'agisse des appareils ou des consommables tels que les pointes de pipette et les Combitips®.



■ Easypet® 3

Faites l'expérience d'une nouvelle dimension du pipetage électronique avec un contrôle complet de la vitesse et la plus grande précision.

- > Idéal pour le remplissage rapide et aseptique de tubes de culture tissulaire
- > Conception légère et équilibrée permettant un pipetage d'une seule main sans fatigue



■ Eppendorf Serological Pipets

Conçues pour travailler en parfaite harmonie avec votre Easypet® 3 en polystyrène vierge ultra-clair.

- > Garanti exempt de pyrogènes, ADN, ARNase et ADNase détectables. Non cytotoxique. Niveau d'assurance stérilité de 10^{-6}
- > Emballé individuellement dans une boîte de distribution robuste.



■ Multipette® E3/E3x

Un système de distribution à moteur basé sur le principe du déplacement positif et qui est capable de pipeter avec précision n'importe quel liquide.

- > Distribuez jusqu'à 100 fois sans remplissage, une solution idéale pour les plaques de remplissage.
- > Distribuez tout milieu de culture cellulaire liquide, même moussant, ainsi que ses suppléments.



■ Combitips advanced®

Pointes volumétriques allongées conçues pour travailler en parfaite harmonie avec votre Multipette® E3/E3x.

- > Fabriqué en polypropylène vierge sans agents anti-adhérents, plastifiants ni biocides
- > Certificat de qualité pour l'absence d'embryotoxicité chez la souris



■ Eppendorf Xplorer®

Les pipettes électroniques Eppendorf Xplorer sont conçues pour éliminer les nombreux risques d'erreur potentiels associés au pipetage manuel.

- > Pipettes monocanal, à 8 et à 12 canaux pour pipetage de liquides de 0,5 µL à 10 mL
- > Idéal pour la distribution séquentielle et le pipetage rapides lors du travail avec des plaques.



■ Eppendorf PhysioCare Concept®

Il a été démontré que l'utilisation de nos instruments de manipulation des liquides permettait de réduire au maximum l'effort physique et psychique.

- > Comme vous passez beaucoup de temps à pipeter dans votre laboratoire, Eppendorf s'occupe de la conception ergonomique des pipettes en fonction de vos besoins.
- > Pour un flux de travail amélioré

Eppendorf Tubes® 3810X

Références

Description	Code couleur	Réf.
Eppendorf Tubes® 3810X , 1,5 mL, stabilité de centrifugation <i>g</i> -safe®		
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☐ incolores	0030 125 150
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ jaunes	0030 125 207
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ rouge	0030 125 193
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ bleu	0030 125 177
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ vert	0030 125 185
PCR clean, 1 000 tubes	☐ incolores	0030 125 215
Eppendorf Tube Rack , 36 positions, pour tubes 1,5 mL et 2,0 mL, 2 unités, polypropylène, pour réfrigérer à -86°C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique		0030 119 819
Storage Box 8 × 8 , pour 64 tubes 1-2 mL, 3 unités, hauteur 53 mm, 2 pouces, polypropylène, pour refroidissement à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique		0030 140 524

Eppendorf Safe-Lock Tubes

Références

Description	Code couleur	Réf.
Eppendorf Safe-Lock Tubes , 0,5 mL		
Eppendorf Quality™, 500 tubes	☐ incolores	0030 121 023
Eppendorf Quality™, 500 tubes	☒ jaunes	0030 121 112
Eppendorf Quality™, 500 tubes	☒ rouge	0030 121 120
Eppendorf Quality™, 500 tubes	☒ bleu	0030 121 139
Eppendorf Quality™, 500 tubes	☒ vert	0030 121 147
Eppendorf Quality™, 500 tubes	☒ ambré (protection contre la lumière)	0030 121 155
Eppendorf Quality™, 500 tubes	couleurs assorties (pour 100)	0030 121 708
Biopur®, 50 tubes, emballage individuel	☐ incolores	0030 121 570
Forensic DNA Grade, 500 tubes (10 sacs × 50 tubes)	☐ incolores	0030 123 603
PCR clean, 500 tubes	☐ incolores	0030 123 301
Eppendorf Safe-Lock Tubes , 1,5 mL		
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☐ incolores	0030 120 086
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ jaunes	0030 120 159
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ rouge	0030 120 167
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ bleu	0030 120 175
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ vert	0030 120 183
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ ambré (protection contre la lumière)	0030 120 191
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	couleurs assorties (pour 200)	0030 121 694
Biopur®, 100 tubes, emballage individuel	☐ incolores	0030 121 589
Forensic DNA Grade, 500 tubes (10 sacs × 50 tubes)	☐ incolores	0030 123 611
PCR clean, 1 000 tubes	☐ incolores	0030 123 328
Eppendorf Safe-Lock Tubes , 2,0 mL		
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☐ incolores	0030 120 094
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ jaunes	0030 120 205
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ rouge	0030 120 213
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ bleu	0030 120 221
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ vert	0030 120 230
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	☒ ambré (protection contre la lumière)	0030 120 248
Eppendorf Quality™, 1 000 tubes	couleurs assorties (pour 200)	0030 121 686
Biopur®, 100 tubes, emballage individuel	☐ incolores	0030 121 597
Forensic DNA Grade, 500 tubes (10 sacs × 50 tubes)	☐ incolores	0030 123 620
PCR clean, 1 000 tubes	☐ incolores	0030 123 344
Micropestle , pour la resuspension des granulés dans des tubes de 1,5 mL/2,0 mL, 10 unités		0030 120 973

Eppendorf Tubes® 5,0 ml

Références

Description	Réf.
Eppendorf Tubes 5,0 mL avec capuchon pression	
Eppendorf Quality™, incolores, 200 tubes, (2 sacs × 100 tubes)	0030 119 401
PCR clean, 200 tubes (2 sacs × 100 tubes)	0030 119 460
Sterile, 200 tubes (10 sacs × 20 tubes)	0030 119 487
Biopur®, 50 tubes (emballage individuel)	0030 119 479
Forensic DNA Grade, incolores, 200 tubes (4 sacs × 50 tubes)	0030 119 606
Protein LoBind, PCR clean, 100 tubes (2 sacs × 50 tubes)	0030 108 302
DNA LoBind, PCR clean, 200 tubes (4 sacs × 50 tubes)	0030 108 310
Ambré (protection contre la lumière), Eppendorf Quality™, 200 tubes (2 sacs × 100 tubes)	0030 119 452
Kit de démarrage, PCR clean, 400 tubes (2 packs de 2 sacs × 100 tubes), 2 racks (avec 16 espaces), blanc, universel adaptateur pour rotors avec un trou pour tubes coniques 15 mL (8 unités)	0030 119 380
Clip de tube 5,0 mL, 10 unités, attache le couvercle pour l'ébullition	0030 119 509
Eppendorf Tubes® 5,0 mL avec capuchon à vis	
Eppendorf Quality™, 200 tubes (2 sacs × 100 tubes)	0030 122 305
PCR clean, 200 tubes (2 sacs × 100 tubes)	0030 122 313
Sterile, exempt de pyrogènes, d'ADNase, d'ARNase et d'ADN, 200 tubes (2 sacs × 100 tubes)	0030 122 321
DNA LoBind, PCR clean, 200 tubes	0030 122 348
Protein LoBind, PCR clean, 200 tubes	0030 122 356
Amber (protection contre la lumière), 200 tubes	0030 122 330
Kit de démarrage, PCR clean, 400 tubes (2 packs de 2 sacs × 100 tubes), 2 racks (avec 16 espaces), blanc, universel adaptateur pour rotors avec un trou pour tubes coniques 15 mL (8 unités)	0030 122 364

Eppendorf Conical Tubes 15 mL

Références

Description	Réf.
Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, Sterile , exempts de pyrogène, d'ADNase, d'ARNase et d'ADN, 500 tubes (10 sacs × 50 tubes)	0030 122 151
Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, Sterile , exempts de pyrogène, d'ADNase, d'ARNase et d'ADN humain et bactérien, incolores, 500 tubes (20 racks × 25 tubes)	0030 122 160
Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, Forensic DNA Grade , incolores, 100 tubes, emballés individuellement	0030 122 259
Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, Protein LoBind, PCR clean , incolores, 200 tubes (4 sacs × 50 tubes)	0030 122 216
Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, Protein LoBind, PCR clean , incolores, 200 tubes (4 sacs × 50 tubes)	0030 122 208
Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, Sterile , exempts de pyrogènes, d'ADNase, d'ARNase et d'ADN humain et bactérien, ambrés (protection contre la lumière), 200 tubes (4 sacs de 50 tubes)	0030 122 194

Eppendorf Conical Tubes 25 mL

Références

Description	Réf.
Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon pression	
Eppendorf Quality™, incolores, 200 tubes, (5 sacs × 40 tubes)	0030 118 405
PCR clean, incolores, 200 tubes, (5 sacs × 40 tubes)	0030 118 413
Sterile, exempt de pyrogènes, d'ADNase, d'ARNase, d'ADN humain et bactérien, incolores, 150 tubes, (6 sacs × 25 tubes)	0030 118 421
Pack de démarrage, PCR clean, 200 tubes, 4 supports pour un seul tube, 6 adaptateurs de centrifugation	0030 118 502
Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon à vis	
Eppendorf Quality™, incolores, 200 tubes, (4 sacs × 40 tubes)	0030 122 410
PCR clean, incolores, 200 tubes, (4 sacs × 50 tubes)	0030 122 429
Sterile, exempt de pyrogènes, d'ADNase, d'ARNase, d'ADN humain et bactériel, incolores, 200 tubes, (8 sacs × 25 tubes)	0030 122 437
Kit de démarrage, PCR clean, 200 tubes, 4 supports pour un seul tube, 6 adaptateurs de centrifugation	0030 122 500

Eppendorf Conical Tubes 50 mL

Références	
Description	Réf.
Eppendorf Conical Tubes, 50 mL, Sterile, exempts de pyrogène, d'ADNase, d'ARNase et d'ADN, 500 tubes (20 sacs de 25 tubes)	0030 122 178
Eppendorf Conical Tubes, 50 mL, Sterile, exempts de pyrogène, d'ADNase, d'ARNase et d'ADN humain et bactérien, incolores, 300 tubes (12 racks de 25 tubes)	0030 122 186
Eppendorf Conical Tubes, 50 mL, Forensic DNA Grade, incolores, 48 tubes, emballés individuellement	0030 122 267
Eppendorf Conical Tubes, 50 mL, Protein LoBind, PCR clean, incolores, 200 tubes (4 sacs × 50 tubes)	0030 122 240
Eppendorf Conical Tubes, 50 mL, Protein LoBind, PCR clean, incolores, 200 tubes (4 sacs × 50 tubes)	0030 122 232
Eppendorf Conical Tubes, 50 mL, Sterile, exempts de pyrogène, d'ADNase, d'ARNase et d'ADN humain et bactérien, ambrés (protection contre la lumière), 200 tubes (4 sacs de 50 tubes)	0030 122 224

Eppendorf Tube Racks

Références	
Description	Réf.
Eppendorf Tube Rack pour tubes de 0,5 mL, 48 puits (3 rangées de 16 puits), 2 unités	0030 119 800
Eppendorf Tube Rack pour tubes de 1,5/2,0 mL, 36 puits (3 rangées de 12 puits), 2 unités	0030 119 819
Eppendorf Tube Rack pour tubes de 5,0/15 mL, 12 puits (2 rangées de 6 puits), 2 unités	0030 119 827
Eppendorf Tube Rack pour tubes de 5,0/15/25/50 mL tubes, 12 puits (6 × 5,0/15 mL et 6 × 25/50 mL), 2 unités	0030 119 835
Eppendorf Tube Rack pour cryotubes, 36 puits (3 rangées de 12 puits), 2 unités	0030 119 843
Eppendorf Cuvette Rack, 30 puits (3 rangées de 10 puits), 2 unités	0030 119 851
Eppendorf Tube Rack pour tubes de 0,5 mL (16 emplacements), 2 unités, blanc, convient aussi aux tubes coniques à capuchon à vis de 15 mL	0030 119 495

Eppendorf Storage Boxes

Références	
Description	Réf.
Eppendorf Storage Box 10 x 10, pour 100 tubes cryogéniques à filetage interne, 3 unités, hauteur 53mm, 2 pouces, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 508
Eppendorf Storage Box 9 x 9, pour 81 tubes (cryogéniques) à capuchon vissé 1-2 mL, 3 unités, hauteur 53 mm, 2 pouces, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 516
Eppendorf Storage Box 9 x 9, pour 81 tubes (cryogéniques) à capuchon vissé 3 mL, 3 unités, hauteur 76 mm, 3 pouces, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 540
Eppendorf Storage Box 9 x 9, pour 81 tubes (cryogéniques) à capuchon vissé 4-5 mL, 3 unités, hauteur 102 mm, 4 pouces, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 567
Eppendorf Storage Box 8 x 8, pour 64 tubes 1-2 mL, 3 unités, hauteur 53 mm, 2 pouces, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 524
Eppendorf Storage Box 5 x 5, pour 25 tubes de 5 mL, 4 unités, hauteur 64 mm, 2,5 pouces, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 532
Eppendorf Storage Box 5 x 5, pour 25 tubes à capuchon vissé 5 de mL, 3 unités, hauteur 76 mm, 3 pouces, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 613
Eppendorf Storage Box 5 x 5, pour 25 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur 127 mm, 5 pouces, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 583
Eppendorf Storage Box 3 x 3, pour 9 tubes de 25 mL et 4 tubes de 5 mL, 2 unités, hauteur 89 mm, 3,5 pouces, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 729
Eppendorf Storage Box 3 x 3, pour 9 tubes de 50 mL et 4 tubes de 15 mL, 2 unités, hauteur 127 mm, 5 pouces, polypropylène, pour réfrigération jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique	0030 140 591

Eppendorf PCR Tubes

Références	
Description	Réf.
Eppendorf PCR Tubes, 0,2 mL	
PCR clean, incolores, 1 000 tubes	0030 124 332
Forensic DNA Grade, 500 tubes (10 sacs × 50 tubes)	0030 124 707
PCR clean, bandes 8 tubes, 120 unités (960 tubes)	0030 124 359
Eppendorf PCR Tubes, 0,5 mL	
PCR clean, avec couvercle à charnière, clair, 500 unités.	0030 124 537

Bandes d'Eppendorf PCR Tube

Références	
Description	Réf.
Eppendorf PCR Tube Strips, 0,1 mL	
PCR clean, sans couvercles (12 × 10 bandes)	0030 124 804
PCR clean, avec bandes à capuchons, convexe (12 × 10 bandes)	0030 124 812
PCR clean, avec bandes à capuchons, plates (12 × 10 bandes)	0030 124 820

Bandes de capuchons de PCR Eppendorf

Références	
Description	Réf.
Bandes de capuchons, 8 bandes	
convexes, 120 unités (12 × 10 unités.)	0030 124 839
plates, 120 unités. (12 × 10 unités.)	0030 124 847


Bandes de capuchons Masterclear® et bandes de tubes de PCR en temps réel

Références	
Description	Réf.
real-time PCR Tube Strips, sans capuchons	
120 unités (12 × 10 unités)	0030 132 882
Masterclear® Cap Strips et real-time PCR Tube Strips	
120 unités (12 × 10 unités)	0030 132 890
Bandes à capuchons Masterclear®	
120 unités (12 × 10 unités)	0030 132 874

Vous essayez de déchiffrer des étiquettes de tubes ?

« Les tubes stockés doivent être étiquetés » – naturellement, tout le monde est d'accord dans le laboratoire. En réalité, vous trouverez toujours quelques tubes voire plus dans votre congélateur sans aucune étiquette ou avec une étiquette ressemblant à des hiéroglyphes. Dans de nombreux laboratoires, il existe une deuxième règle : les tubes sans étiquette sont éliminés dès qu'ils sont trouvés.

Il est recommandé d'étiqueter correctement les tubes pour faciliter la lecture et la rendre aussi fiable que possible pour tout le monde. Les étiquettes imprimées sur les tubes peuvent comporter des inscriptions, des code-barres ou les deux. L'étiquetage intelligent de vos échantillons de grande valeur est crucial pour une identification sûre et, en fin de compte, pour des résultats sûrs. Gérez vos échantillons (avec code-barres) avec un logiciel de gestion d'échantillons comme eLABInventory.

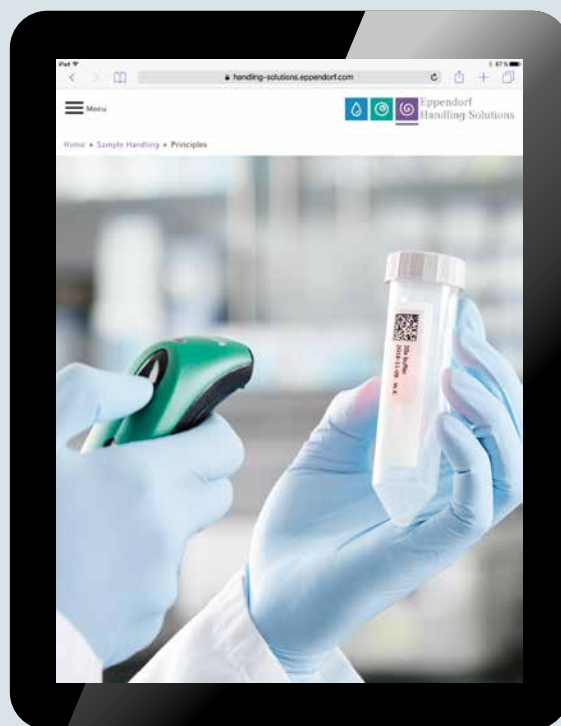

> Obtenez une période d'essai gratuite de 30 jours sur www.elabinventory.com/eppendorf

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf France SAS · 2/6 rue du Château d'Eau · 78360 Montesson · France
eppendorf@eppendorf.fr · www.eppendorf.fr

www.eppendorf.com/tubes

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppi®, Eppis®, Easytip®, Combitips®, Combitips advanced®, Multipette®, Eppendorf Xplorer®, PhysioCare Concept®, Eppendorf ThermoMixer®, MixMate®, Eppendorf Tubes®, g-Safe®, Eppendorf LoBind®, Masterclear® and Biopur® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Eppendorf ThermoStat™, Eppendorf SmartBlock™, Eppendorf Quality™ and SnapTec™ are trademarks of Eppendorf AG, Germany. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2019 by Eppendorf AG. Order No : AA01 002 230/FR1/0.7T/0919/SSO/K&R